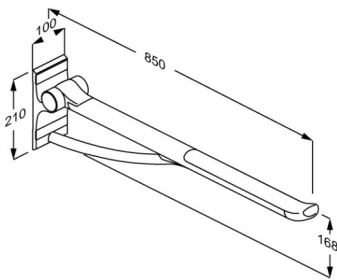




<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	PLUS toalettarmstöd, 850 mm R360085000
<b>Färg</b>	VVS:615871200 NRF:6191072 RSK:8487438 EAN:5708590367910 HMI: 123553 FDA:ILS/D135866 Vit
<b>Beskrivning</b>	 <p>Alla toalettstöd PLUS har en integrerad dämparfunktion som säkerställer att stödet sänks kontrollerat från vertikalt till horisontellt läge. Lämplig för användning med vägghängda toaletter där avståndet från vägg till front är 700 mm, och för golvstående toaletter. <i>Ersätter utgående modeller R3085 och RF085.</i></p> <p>PLUS toalettarmstöd med fjäderbelastning. Total längd 850 mm. Ergonomisk design, som ger skön vila åt armarna och ett optimalt stöd när man skal resa eller sätta sig. Fast höjd. Uppfällbart. Material: Aluminium med greppfast tvåkomponentsplast. Exkl. monteringskruvar.</p>
<b>Justerbar</b> <b>Produktkapacitet</b>	Fast höjd  Maximal belastning: 150 kg. När toalettarmstöden belastas med 150 kg, belastas varja monterings skruv med 161 kg.  <i>PLUS toalettarmstöd är testad statistiskt med respektive 700 kg (tät på väggen), 425 kg (på midten) och 225 kg (på yterpunkt).</i>
<b>Material</b>  <b>Ergonomi</b>	Toalettarmstöden är främst framställt i 10-mikrometer anodiserad aluminium. Greppen är belagda med en glidyta av termoplastisk elastomer (TPE) som omsluter en glasförstärkt nylonkärna. Interna komponenter och fästelement är främst gjorda av rostfritt stål.  Stabilt stöd i form av ergonomiska toalettarmstöd ger ökad trygghet till den sittande brukaren och underlättar samtidigt den dagliga förflyttningen från och till hjälpmedel. Ett bra toalettarmstöd ger skön vila åt armarna och ett optimalt stöd när man ska resa eller sätta sig.



# PRESSALIT®

<b>Product</b>	PLUS toalettarmstöd, 850 mm
<b>Varunummer</b>	R360085000
<b>Funktioner</b>	Toalettarmstöden är försedda med ett gångjärn som gör det möjligt att fälla upp toalettarmstöden mot väggen. Uppfällbara toalettarmstöd ger gott om plats i rummet när de inte används.
<b>Garanti</b>	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.
<b>Rengöring</b>	<p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p><b>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Oxyplus-acid 2% (Diversey) WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes</p> <p><b>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p>
<b>Överensstämmelses deklaration</b>	Denne produkt är tillverkad i enlighet med förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter.

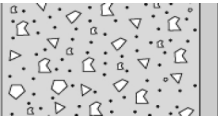
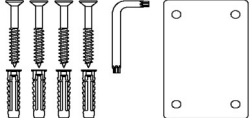

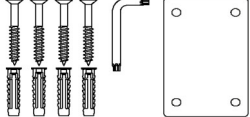
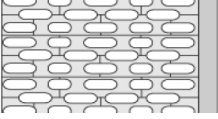
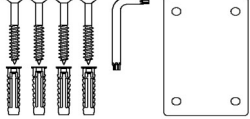
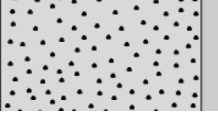
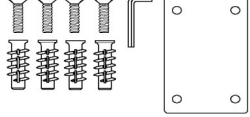
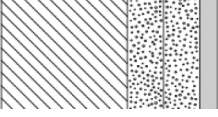
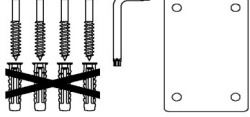


<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	PLUS toalettarmstöd, 850 mm R360085000
	<p><b>Avsedd användning</b> Toalettarmstödet används som stöd för en person som ska sätta sig på eller resa sig från en toalett, eller vid sidoflyttning från rullstol.</p> <p><b>Användningsmiljö</b> För användning inomhus i våtrumsmiljö, till exempel ett badrum, i privata hem, på vårdhem och sjukhus. Vid yrkesmässig användning är den förväntade livslängden 10 år. <i>Livscykeltest har utförts enligt ISO 17966:2016.</i></p> <p>För underhåll hänvisas till användnings – underhållsinstruktion som är anslutna till produkten, detta finns på hemsidan under "Downloads".</p> <p><b>Link til eBVD:</b> <a href="https://www.ebvd.org/BMI/Document/Export/4222/0/Pdf">https://www.ebvd.org/BMI/Document/Export/4222/0/Pdf</a></p> <p>Denna produkt har fått följande bedömning: Byggvarubedömningen: Accepteras</p>

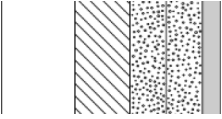
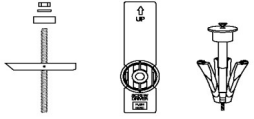
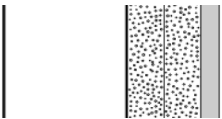
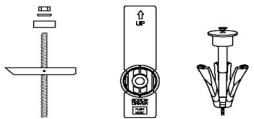
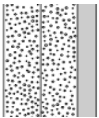


<b>Product</b>	PLUS toalettarmstöd, 850 mm
<b>Varunummer</b>	R360085000

## Montage i olika väggtyper

	<b>Betong &gt;B25</b> V8604 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø8 x 70 försänkt, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	<b>Mursten &gt;= Mz12</b> V8604 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø8 x 70 försänkt, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	<b>Cementsten &gt;= Hlz12</b> V8604 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø8 x 70 försänkt, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	<b>Lättbetong P4</b> V8654 - Monteringsset, 4 st. bultar M8 x 35 försänkt, plugg FTP M 8. Måste beställas separat.	
	<b>Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä</b> V8604 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø8 x 70 försänkt, plugg SX10. Använd inte plugg. Måste beställas separat.	



<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	PLUS toalettarmstöd, 850 mm R360085000
	<b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfänér</b> Monteringskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	<b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm</b> Monteringskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	<b>Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2</b> Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår. 