




PRESSALIT®

Article Numéro article	PLUS support de lavabo avec levier de commande, réglable en hauteur électriquement og réglable latéralement manuellement R4780
Description	<p>VVS:654003210 NRF:6132537 RSK:7972595 EAN:5708590309330 HMI: 71756 NBS:N13:30,335</p>  <p>PLUS supports de lavabo sont disponibles en versions réglables en hauteur électriquement, pneumatiquement et manuellement. Ils peuvent être montés sur le mur ou sur PLUS glissière-supports de Pressalit.</p> <p>PLUS support de lavabo, à moteur électrique avec levier de commande, réglable en hauteur de 300 mm par levier de commande positionné sur le côté du lavabo. Le levier de commande peut servir de porte-serviettes. Le levier peut être placé à droite ou à gauche du lavabo. Réglable latéralement aussi. Flexibles R2064/R2065/R2067 recommandés. Matériaux : aluminium et matière synthétique. Avec fixations pour lavabo. Pour équipement de PLUS glissière-support horizontale (non comprise).</p>
Réglage	Réglable en hauteur et latéralement
Hauteur de réglage	300 mm
Capacité du produit	<p>Charge maximale admissible : 100 kg. Convient pour des lavabos jusqu'au 22 kg. Lorsque le lavabo est chargé de 100 kg, chaque vis de montage est chargé de 22 kg. <i>Le support de lavabo doit être en mesure de supporter le poids du lavabo ainsi que le poids d'une personne s'appuyant dessus pendant sa toilette ou s'en aidant pour se relever quand elle est assise.</i> Ni le lavabo ni le support de lavabo ne sont conçus pour porter ou transporter le poids d'une personne, et les méthodes de test applicables au support de lavabo reflètent les exigences suivantes : La norme ISO 17966 prescrit un test statique sur le bord avant du lavabo chargé à 75% du poids maximal de l'utilisateur. <i>Par exemple : pour une charge maximale admissible du support annoncée à 100 kg avec un lavabo de 22 kg, selon la norme ISO 17966, cela équivaldrait à un utilisateur pesant 104 kg qui se pencherait sur le bord avant du lavabo.</i></p>

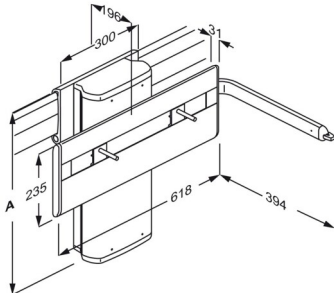

PRESSALIT®

Article	PLUS support de lavabo avec levier de commande, réglable en hauteur électriquement et réglable latéralement manuellement
Numéro article	R4780
Vitesse en montant	Vitesse en montant: 20 mm/s Vitesse en descendant: 23 mm/s
Niveau sonore	45 dB
Matériaux	Le support de lavabo est principalement composé d'aluminium anodisé 10 microns. Les extrémités du support sont recouvertes de pièces de finition en polymère ABS. Réglage par levier comprenant un commutateur en polymère ABS placé à l'extrémité d'un bras en aluminium anodisé.
Ergonomie	Le support de lavabo convient à tous les types de lavabos avec fixation par boulons. Arrondi et fin, le design facilite le nettoyage.
Fonctions	Le support de lavabo est livré avec un levier de commande, qui peut aussi servir de porte-serviette. Le levier peut être placé à droite ou à gauche du lavabo. Avec un support de lavabo électrique, il est facile pour l'aide-soignant et l'utilisateur de régler la hauteur du lavabo à la hauteur désirée. Le support peut être déplacé le long de la glissière-support horizontale.
Raccordement électrique (V)	230
Vérin	LA40 (Linak) 4000N, IPX6
Boîte de contrôle	SMPS14002
Consommation d'électricité	Consommation d'électricité en charge maximale: 75 W Consommation d'électricité en veille: 1,5 W
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.



PRESSALIT®

Article	PLUS support de lavabo avec levier de commande, réglable en hauteur électriquement og réglable latéralement manuellement
Numéro article	R4780
Nettoyage	<p>Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface.</p> <p>Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage.</p> <p>NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70%</p> <p>NETTOYANTS NON-DÉSINFECTANTS : Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.</p> <p>DÉTARTAGE DE L'ALUMINIUM : Pressalit recommande d'enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes de vinaigre pour 7 volumes d'eau et de sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.</p>
Déclaration de conformité	<p>Ce produit répond aux exigences propres à :</p> <ul style="list-style-type: none">- la réglementation (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux- la directive 2006/42/CE du Conseil sur les mécanismes- la directive 2011/65/UE sur RoHS.



PRESSALIT®

Article	PLUS support de lavabo avec levier de commande, réglable en hauteur électriquement og réglable latéralement manuellement
Numéro article	R4780

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®