




PRESSALIT®

Article Numéro article	MSCT 4 chariot de douche et de change, réglable en hauteur manuellement R9504717000
Couleur	Blanc
Description	<p>EAN:5708590389844 FDA:INW/D546021</p>  <p>Pressalit propose plusieurs tables de douche et de change haut de gamme, mobiles, à hauteur variable ou fixe. Elles sont conçues pour apporter une surface stable pour doucher et changer les personnes à mobilité réduite, enfants et adultes. Ces tables peuvent être utilisées dans les écoles, les établissements de santé, les hôpitaux mais aussi au domicile privé. Elles sont toutes conçues pour être résistantes, confortables et faciles à nettoyer. Leur design et la flexibilité assurent des conditions de travail optimales pour l'aidant ainsi qu'un haut niveau de confort et de sécurité pour l'utilisateur.</p> <p>MSCT 4 chariot de douche et de change, 700 x 1700 mm, quatre côtés rabattables. Réglable en hauteur manuellement avec pédale (hydraulique) Réglable 500 mm de 550 à 1050 mm. Matelas à commander séparément.</p>
Réglage	Réglable en hauteur
Hauteur de réglage	500 mm
Capacité du produit	Poids maximum de l'utilisateur (MUM) : 200 kg. Charge maximale (SWL) : 250 kg. <i>La table a été testée statiquement avec 375 kg, car la norme ISO 17966 exige des tests avec un facteur de sécurité de 1,5.</i>
Matériaux	Plastique, stratifié compact et acier inoxydable laqué.

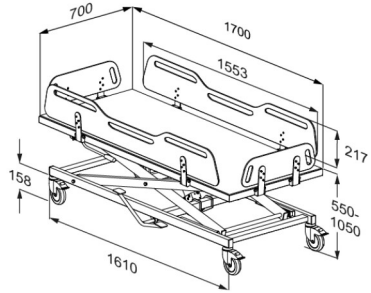

Article Numéro article	MSCT 4 chariot de douche et de change, réglable en hauteur manuellement R9504717000
Ergonomie	<ul style="list-style-type: none">• La barrière de sécurité ergonomique a une partie centrale rabaissée très pratique, qui offre un meilleur accès et un meilleur environnement de travail pour le soignant, pendant les transferts, le change ou l'habillage de l'utilisateur.• Les barrières de sécurité manipulables d'une seule main permettent au soignant de maintenir un contact visuel et physique avec l'utilisateur pendant tout le processus des soins. Les rails de sécurité rabattables permettent également un accès facile des quatre côtés de la table.• Les poignées découpées dans les barrières de sécurité permettent à l'utilisateur de participer quand il doit être retourné, cela motive également l'entraînement physique.• Les surfaces de contacts sont lisses et faciles à nettoyer car elles n'accumulent ni la saleté ni les bactéries.
Fonctions	<ul style="list-style-type: none">• Le chariot peut être déplacé d'une pièce à l'autre pour faciliter le transport et pour plusieurs utilisateurs.• Barrières rabattables et relevables intuitivement d'une seule main.
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 3 ans à partir de la date de facturation. REMARQUE Si le produit est placé dans un environnement chargé en sel ou en chlorure, la garantie sera réduite de 3 ans à 1 an. Le sel et le chlorure ont un effet corrosif sur les composants du produit et diminuent la durée de vie du produit.



Article	MSCT 4 chariot de douche et de change, réglable en hauteur manuellement
Numéro article	R9504717000
Nettoyage	<p>Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface.</p> <p>Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage.</p> <p>NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningsprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes</p> <p>NETTOYANTS NON-DÉSINFECTANTS : Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.</p>
Déclaration de conformité	<p>Ce produit répond aux exigences de la réglementation (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.</p>