




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	PLUS rugleuning wit, in hoogte en zijwaarts verstelbaar R6444035
Kleur	NRF:6317051 EAN:5708590365527 HMI: 124205 FDA:INN/D135865 Rood (RAL 3003)
Beschrijving	 Plus rugsteunen zijn leverbaar in tal van kleuren en uitvoeringen, zowel in vaste hoogte als in hoogte verstelbaar. Ze zijn toepasbaar zowel voor muurmontage achter een toilet zonder opbouw reservoir of te monteren op een van de Pressalit hoog-laag toiletsystemen. PLUS rugleuning, 385 x 209 mm, voelt zacht aan. In hoogte verstelbaar over 150 mm en zijwaarts verstelbaar, voor montage op de horizontale PLUS wandrail achter toilet met inbouwreservoir. Zonder gereedschap te verwijderen en weer eenvoudig te bevestigen. Materiaal: Aluminium en polyurethaan schuim met een multiplex kern. Voor montage op de horizontale PLUS wandrail (niet inbegrepen).
Verstelbaarheid Afstelhoogte Product capaciteit	In hoogte en zijwaarts verstelbaar 150 mm Maximale belasting: 50 kg. Maximale gebruikersbelasting: 100 kg Wanneer de rugleuning is geladen met 50 kg, zal elke wandbevestiging met 33 kg zijn belast. <i>De rugleuning moet het gewicht van de persoon die tegen de rugleuning leunend.</i> De rugleuning is niet bedoeld om een persoon te vervoeren , en de testmethoden die van toepassing zijn op de rugleuning weerspiegelen dit: ISO 17966 schrijft een statische test voor bij 50% van het maximale gebruikersgewicht, d.w.z. Wanneer de maximale belasting op een rugleuning wordt gegeven als 50 kg weegt, is het – volgens ISO 17966 – het equivalent van een gebruiker met een gewicht van 100 kg leunend op de rugleuning.
Materialen Ergonomy	De rugleuning is gemaakt van polyurethaan (PU) schuim dat is bedekt met voorgevormd gecoat oppervlak dat is beschermd met een heldere PU-lak. Zacht en antislip materiaal dat warm aanvoelt

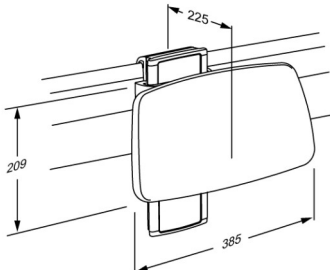

PRESSALIT®

Product	PLUS rugleuning wit, in hoogte en zijwaarts verstelbaar
Artikelnummer	R6444035
Functie	Voor toilet met inbouwreservoir
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum.
Reiniging	Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen. De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden. DESINFECTEERMIDDELEN: Erisan OXY+ Tvättsprit 70% CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH) NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa) Belangrijk: Polyurethaanoppervlakken van PLUS-douchezittingen en PLUS-rugleuningen bevatten een antibacterieel oppervlak, dat wordt aangetast als het met iets anders dan water en zeep wordt gereinigd. Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken anders kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt. ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN: Pressalit raadt aan om kalkaanslag op de muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van 30% schoonmaakazijn en 70 % leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn schoon gemaakt, moeten de onderdelen worden afgeveegd met met schoon water bevochtigde uitgewrongen doek.



PRESSALIT®

Product	PLUS rugleuning wit, in hoogte en zijwaarts verstelbaar
Artikelnummer	R6444035

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

18. august 2026