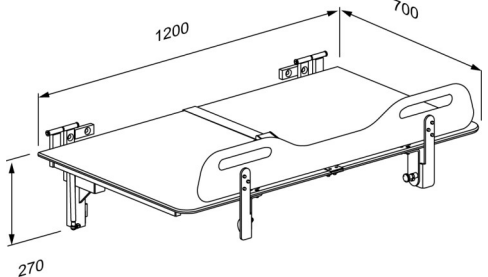




# PRESSALIT®

|  |   |
|--|---|
| <b>Product</b><br><b>Artikelnummer</b> | CT 5000 aankleedstafel, vaste hoogte<br>R8455512000   |
| <b>Kleur</b>                           | Wit   |
| <b>Beschrijving</b>                    | <p>VVS: 777540820<br/>EAN: 5708590376585<br/>HMI: 138135<br/>FDA: INT/D124320</p>  <p>Pressalit biedt een reeks hoogwaardige, vaste, flexibele en mobiele douche-en aankleedtafels van hoge kwaliteit. Deze zijn ontworpen om een stabiel platform te bieden dat geschikt is voor het verzorgen van volwassenen en kinderen. De douche-en aankleedtafels kunnen worden gebruikt in scholen, instellingen, ziekenhuizen en in privéwoningen, en zijn allemaal ontworpen om duurzaam, comfortabel en eenvoudig schoon te maken. Ontwerp en flexibiliteit zorgen voor optimale werkomstandigheden voor de verzorgende en voor een hoog niveau van comfort en veiligheid voor de gebruiker.</p> <p>CT 5000 aankleedstafel, ligvlak in compact laminaat, 700 x 1200 mm, wit. Met veiligheidsrail en lichaams gordel, opklapbaar, vaste hoogte, wandmontage.</p> |
| <b>Verstelbaarheid</b>                 | Vaste montage   |
| <b>Afstelhoogte</b>                    | 0 mm  |
| <b>Product capaciteit</b>              | <p>Maximaal gebruikersgewicht (MUM): 150 kg.<br/>Maximale belasting (SWL): 150 kg.<br/>Wanneer de tafel belast is met 150 kg, is elke wandbevestiging belast met 52 kg.</p> <p><i>Dit product is statisch getest met een belasting van 225 kg, omdat de ISO 17966 norm testen met veiligheidsfactor 1,5 vereist.</i></p>  |
| <b>Materialen</b>                      | Poedergelakt roestvrijstaal, ligvlak in Compact Density Fiberboards (CDF).  |

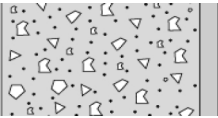
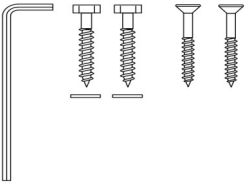

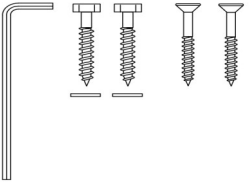
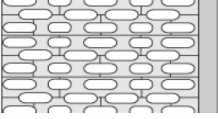
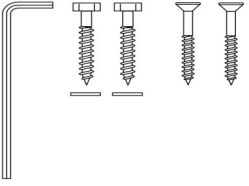
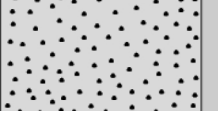
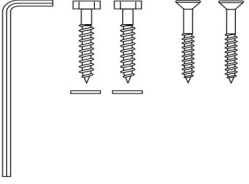
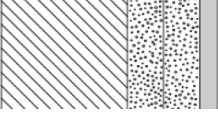
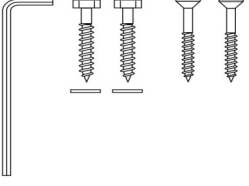


|   |  |
|---|--|
| <b>Product</b><br><b>Artikelnummer</b>  | CT 5000 aankleedstafel, vaste hoogte<br>R8455512000  |
| <b>Ergonomy</b>                         | <p>De ergonomisch ontworpen veiligheidsrail hebben een praktisch lager middengedeelte, dat een betere toegang en werkomgeving biedt voor de verzorger tijdens het verplaatsen, douchen, drogen, verschonen en aankleden van de gebruiker.</p> <p>Gemakkelijk te reinigen, gladde contactvlakken die geen vuil en bacteriën verzamelen.</p>   |
| <b>Garantie</b><br><br><b>Reiniging</b> | <p>Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van drie jaar na de factuurdatum.</p> <p>Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreinigder. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen.</p> <p>De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden.</p> <p><b>DESINFECTEERMIDDELEN:</b><br/>Clinimax Difficil-S<br/>Erisan OXY+<br/>Sprit (husholdningssprit)<br/>Suma Bac D10<br/>Virkon<br/>Rodalon Desinfektionsspray<br/>Lysoformin Spezial<br/>CaviCide<br/>Sufanios Premium<br/>Tvättsprit 70%<br/>Accel PREvention Wipes Lingettes<br/>OxiGenesis from ENVIROX</p> <p><b>NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN:</b><br/>Suma Star free D1<br/>Taski 100<br/>Taski 200<br/>Milizid Citro</p> <p>Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken ander kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.</p> |

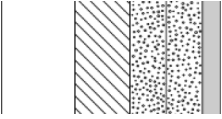

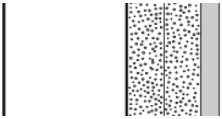

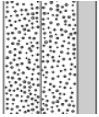



|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| <b>Product</b>       | CT 5000 aankleedstafel, vaste hoogte |
| <b>Artikelnummer</b> | R8455512000                          |

## Installatie in verschillende wandtypes

|   |   |   |
|---|---|---|
|    | <b>Betonwanden &gt;B25</b><br>V8597 - 2 schroeven Ø10 x 70 en 2 verzonken schroeven Ø10 x 80 zijn inbegrepen.<br>Pluggen moeten apart worden besteld.   |    |
|   | <b>Gemetselde wanden &gt;= Mz12</b><br>V8597 - 2 schroeven Ø10 x 70 en 2 verzonken schroeven Ø10 x 80 zijn inbegrepen.<br>Pluggen moeten apart worden besteld.                                    |   |
|  | <b>Kalksteen &gt;= H12</b><br>V8597 - 2 schroeven Ø10 x 70 en 2 verzonken schroeven Ø10 x 80 zijn inbegrepen.<br>Pluggen moeten apart worden besteld.   |  |
|  | <b>Gasbeton P4</b><br>V8597 - 2 schroeven Ø10 x 70 en 2 verzonken schroeven Ø10 x 80 zijn inbegrepen.<br>Pluggen moeten apart worden besteld.   |  |
|  | <b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout</b><br>V8597 - 2 schroeven Ø10 x 70 en 2 verzonken schroeven Ø10 x 80 zijn inbegrepen.<br>Pluggen moeten apart worden besteld. |  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Product</b><br><b>Artikelnummer</b>  | CT 5000 aankleedstafel, vaste hoogte<br>R8455512000   |
|    | <b>Gipsplaten, watervast, versterkt met hout</b><br>Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren.                     |
|    | <b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal</b><br>Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren.  |
|  | <b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast</b><br>Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren.                          |

Bolts for wall fixing are included. It is the responsibility of the installer to ensure that suitable plugs are used. Please see mounting instruction.