




# PRESSALIT®

<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	VALUE IV uppfällbar duschsits med stödben, fast höjd R1622000112
<b>Färg</b>	VVS: 777525412 NRF: 6314098 RSK: 8162782 EAN: 5708590377728 HMI: 124486 Antracitgrå
<b>Beskrivning</b>	 <p>VALUE IV duschsits och ryggstöd är den enkla lösningen för användare som behöver kunna sitta ner medan de tar en dusch.</p> <p>VALUE IV duschsits. Fast höjd. Sits är uppfällbart. Material: Pressgjuten aluminium, Rilsan-belagt, rostfritt stål och vakuumformad polyeten (PE). Inkl. monteringskruvar för massiv sten. Pluggs måste beställas separat.</p>
<b>Justerbar</b> <b>Produktkapacitet</b>	Fast höjd Max brukarvikt: 135 kg. När duschsitsen belastas med 135 kg, belastas varje fästskruv med 125 kg. <i>VALUE duschsitsar testas statistiskt med säkerhetsfaktor 1,5. Detta är i enlighet med kraven i gällande standarder hjälpmedlet.</i>
<b>Material</b> <b>Ergonomi</b> <b>Funktioner</b>	Väggbeslag är tillverkat i pressgjuten aluminium, ramen och stödben i Rilsan-belagt, rostfritt stål. Rilsan-belagningen skyddar mot rost, är skön att röra vid och enkel att rengöra. Sitsen är tillverkat av vakuumformad polyeten (PE). En del brukare behöver sitta ned när de duschar. Den uppfällbara duschsitsen är designad för montering i duschområdet och kan enkelt fällas upp och ned efter behov. Den uppfällbara duschsitsen kan enkelt monteras av vid rengöring.
<b>Garanti</b>	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.

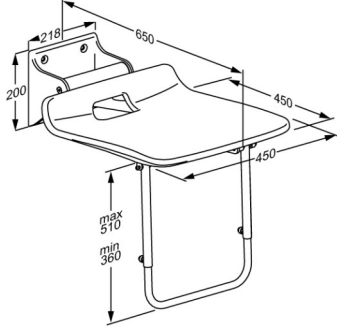

<b>Product</b>	VALUE IV uppfällbar duschsits med stödben, fast höjd
<b>Varunummer</b>	R1622000112
<b>Rengöring</b>	<p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. För rengöring av ytan kan klorinbaserade desinficeringsmedel användas enligt produktspecifikationen och säkerhetsföreskrifterna för de här produkterna.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p><b>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättspit 70% WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes Klorilli (Kilto Clean)</p> <p><b>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p>
<b>Överensstämmelses deklaration</b>	Denne produkt är tillverkad i enlighet med förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter.



# PRESSALIT®

<b>Product</b>	VALUE IV uppfällbar duschsits med stödben, fast höjd
<b>Varunummer</b>	R1622000112

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®