




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	PLUS toiletsteun, 700 mm, linkshandige bediening R371370112
Kleur	VVS:615876112 NRF:6191105 EAN:5708590368313 HMI: 125884 FDA: ILS/D135866 Antracietgrijs
Beschrijving	 Alle PLUS toiletsteunen zijn voorzien van een geïntegreerd contragewicht, dat zorgt voor een gecontroleerde beweging tussen horizontale en verticale posities. PLUS toiletsteun met veer. Totale lengte 730 mm, ergonomisch gevormd om een duidelijk einde aan de toiletsteun te geven. Linkshandige bediening. In hoogte verstelbaar zonder gebruik van gereedschap. Opklapbaar en afneembaar. Materialen: de toiletsteunen zijn gemaakt van 10-micrometer geanodiseerd aluminium, met een antislip-grip oppervlak gemaakt van zachte SEBS met een met glasvezel nylon kern. Voor montage op verticale PLUS wandrails of SELECT TL2 hoog/laag toiletsysteem (niet inbegrepen).
Verstelbaarheid Afstelhoogte Product capaciteit	In hoogte verstelbaar 240 mm Maximale belasting: 150 kg. Wanneer de toiletsteun belast is met 150 kg, wordt elke wandbevestiging in de verticale wandrail belast met 41 kg. <i>PLUS toiletsteunen zijn statisch getest met 700 kg (dicht bij de muur), 425 kg (in het midden) en 225 kg (aan het uiteinde).</i>
Materialen	De toiletsteunen zijn voornamelijk gemaakt van geanodiseerd aluminium van 10 micrometer, met een antislip-grip oppervlak aan het einde van zachte SEBS en met een met glasvezel versterkte nylon kern. De toiletsteun is tevens gemaakt van zachte SEBS. Interne onderdelen en de bevestigingen zijn voornamelijk gemaakt van RVS. De scharniercilinder is afgedekt met ABS-polymeer.

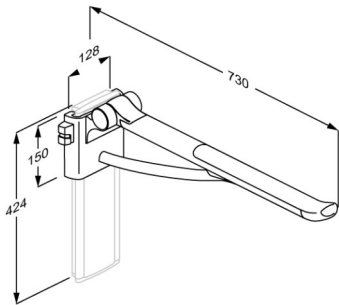

PRESSALIT®

Product Artikelnummer	PLUS toiletsteun, 700 mm, linkshandige bediening R371370112
Ergonomy	De ovale vorm geeft een eenvoudig en comfortabel oppervlak om tegen te leunen en duwen. Het uiteinde van de toiletsteun is gebogen zodat het eenvoudiger is om jezelf vanuit een zittende positie naar voren te trekken en geeft ook een duidelijk einde van de toiletsteun. Zacht en antislip materiaal dat warm aanvoelt.
Funktie	Opklapbaar tegen de muur. De onderzijde is gemaakt voor de montage van diverse accessoires b.v. closetrolhouder.
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum.



PRESSALIT®

Product	PLUS toiletsteun, 700 mm, linkshandige bediening
Artikelnummer	R371370112
Reiniging	Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen. De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden. DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Oxyplus-acid 2% (Diversey) WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken anders kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt. ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN: Pressalit raadt aan om kalkaanslag op de muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van 30% schoonmaakazijn en 70 % leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn schoon gemaakt, moeten de onderdelen worden afgeveegd met met schoon water bevochtigde uitgewrongen doek.



PRESSALIT®

Product	PLUS toiletsteun, 700 mm, linkshandige bediening
Artikelnummer	R371370112
	Beoogd gebruik De toiletsteun wordt gebruikt als ondersteuning voor het gaan zitten of opstaan van een toilet, of voor het zijwaarts verplaatsen vanuit een rolstoel. Operationele omgeving Voor gebruik in een natte omgeving in huis, zoals een badkamer of een wasruimte in particuliere woningen, verpleeghuizen en ziekenhuizen. Voor institutioneel gebruik is de verwachte levensduur 10 jaar. <i>Levenscyclus test is uitgevoerd volgens ISO 17966:2016.</i> Voor onderhoud raadpleeg de gebruikers handleiding, die bij het product is geleverd of via de website onder het kopje "Downloads".

pressalit.com

PRESSALIT®