




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	VALUE IV douchezitting met vloersteun, vaste montage R1622000112
Kleur	VVS: 777525412 NRF: 6314098 RSK: 8565070 EAN: 5708590377728 HMI: 124486 DB: 2510921 FDA: INN/D135865 Antracietgrijs
Beschrijving	 VALUE IV opklapbare douchezitting en rugleuning verzorgen een eenvoudige oplossing voor gebruikers die moeten gaan zitten tijdens het douchen. VALUE IV douchezitting. Vaste montage. De zitting is opklapbaar. Materialen: gegoten aluminium, Rilsan-gecoat roestvrijstaal en vacuüm-gegoten polyethyleen (PE). Inclusief bevestigingsbouten voor bakstenen muur. De pluggen zijn afhankelijk van het wandtype en moeten apart besteld worden.
Verstelbaarheid Product capaciteit	Vaste montage Maximale belasting: 135 kg. Wanneer de zitting belast is met 135 kg, is elke wandbevestiging belast met 125 kg. <i>Dit product is statisch getest met een veiligheidsfactor van 1,5 wat een vereiste is volgens de toegepaste normen voor ondersteunende hulpmiddelen..</i>
Materialen Ergonomy Funktie	Het wandprofiel is gemaakt van gegoten aluminium en het frame is gemaakt van roestvrijstaal met Rilsan-coating. Rilsan biedt een goede bescherming tegen corrosie en is comfortabel om aan te raken en eenvoudig te reinigen. De zitting is gemaakt van vacuüm-gegoten polyethyleen (PE). Het antislipmotief van de zitting zorgt ervoor dat water zowel in horizontale als in verticale stand wordt afgevoerd. De zitting is lichtjes naar het midden toe gebogen, waardoor de gebruiker gemakkelijker in het midden van de zitting blijft zitten. Het opklapbare douchezitting is ontworpen voor plaatsing in de doucheruimte en kan naar behoefte eenvoudig worden op- en neergeklapt. Het zitvlak en de rugleuning kunnen eenvoudig worden verwijderd om ze schoon te maken.

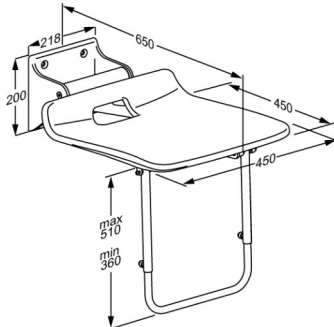

Product	VALUE IV douchezitting met vloersteun, vaste montage
Artikelnummer	R1622000112
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum.
Reiniging	Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak. Desinfecteermiddelen op chloorbasis voor het desinfecteren van oppervlakken mogen worden gebruikt volgens de productspecificatie en veiligheidsmaatregelen voor deze producten. De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden. DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes Klorilli (Kiilto Clean) NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken anderszins kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.



PRESSALIT®

Product	VALUE IV douchezitting met vloersteun, vaste montage
Artikelnummer	R1622000112

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

13. juli 2026