




PRESSALIT®

Article Numéro article	MCT 3 table d'habillage mobile, réglable en hauteur électriquement R9632719000
Couleur	Blanc
Description	<p>VVS: 777542330 EAN: 5708590389936 HMI: 139819</p>  <p>Pressalit propose plusieurs tables de douche et de change haut de gamme, mobiles, à hauteur variable ou fixe. Elles sont conçues pour apporter une surface stable pour doucher et changer les personnes à mobilité réduite, enfants et adultes. Ces tables peuvent être utilisées dans les écoles, les établissements de santé, les hôpitaux mais aussi au domicile privé. Elles sont toutes conçues pour être résistantes, confortables et faciles à nettoyer. Leur design et la flexibilité assurent des conditions de travail optimales pour l'aidant ainsi qu'un haut niveau de confort et de sécurité pour l'utilisateur.</p> <p>MCT 3 table d'habillage mobile, 700 x 1900 mm, deux côtés rabattables. Réglable en hauteur électriquement par télécommande filaire. Réglable 500 mm de 450 à 950 mm. Matelas à commander séparément. Note : Le MCT 3 doit être branché sur une source d'alimentation principale pour utiliser la fonction de réglage de la hauteur.</p>
Réglage	Réglable en hauteur
Hauteur de réglage	500 mm
Capacité du produit	Poids maximum de l'utilisateur (MUM) : 200 kg. Charge maximale (SWL) : 205 kg. <i>La table a été testée statiquement avec 512,5 kg, car la norme IEC 60601-1 exige des tests avec un facteur de sécurité de 2,5.</i>
Vitesse en montant	Vitesse en montant: 17 mm/s Vitesse en descendant: 17 mm/s
Niveau sonore	50 dB
Matériaux	Plastique, Compact Density Fiberboards (CDF) et acier laqué.

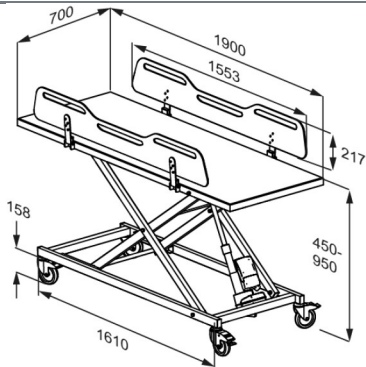

Article	MCT 3 table d'habillage mobile, réglable en hauteur électriquement
Numéro article	R9632719000
Ergonomie	<ul style="list-style-type: none">• La barrière de sécurité ergonomique a une partie centrale rabaissée très pratique, qui offre un meilleur accès et un meilleur environnement de travail pour le soignant, pendant les transferts, le change ou l'habillage de l'utilisateur.• Les barrières de sécurité manipulables d'une seule main permettent au soignant de maintenir un contact visuel et physique avec l'utilisateur pendant tout le processus des soins. Les rails de sécurité rabattables permettent également un accès facile des quatre côtés de la table.• Les poignées découpées dans les barrières de sécurité permettent à l'utilisateur de participer quand il doit être retourné, cela motive également l'entraînement physique.• Les surfaces de contacts sont lisses et faciles à nettoyer car elles n'accumulent ni la saleté ni les bactéries.
Fonctions	<ul style="list-style-type: none">• Le chariot peut être déplacé d'une pièce à l'autre pour faciliter le transport et pour plusieurs utilisateurs.• Barrières rabattables et relevables intuitivement d'une seule main.
Raccordement électrique (V)	230
Vérin	LA40 (Linak) IPX6
Boîte de contrôle	CA30 (Linak) IPX6
Télécommande filaire	HB30 (Linak) IPX6
Consommation d'électricité	Consommation d'électricité en charge maximale: 280 W Consommation d'électricité en veille: 0,5 W
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 3 ans à partir de la date de facturation. REMARQUE Si le produit est placé dans un environnement chargé en sel ou en chlorure, la garantie sera réduite de 3 ans à 1 an. Le sel et le chlorure ont un effet corrosif sur les composants du produit et diminuent la durée de vie du produit.



Article	MCT 3 table d'habillage mobile, réglable en hauteur électriquement
Numéro article	R9632719000
Nettoyage	<p>Pour nettoyer le produit, utilisez un chiffon humide trempé dans un mélange légèrement savonneux, tel qu'une solution de nettoyage universelle. Après le nettoyage, il est indispensable d'essuyer le produit à l'aide d'un chiffon doux sec. Cette étape est cruciale pour éviter que les matériaux ne se décolorent. Cela permet également d'éviter toute dégradation potentielle de la peinture de surface.</p> <p>Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage.</p> <p>NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningsprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes OxiGenesis from ENVIROX</p> <p>NETTOYANTS NON-DÉSINFECTANTS : Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.</p>
WEEE	<p>Renseignez-vous auprès de la filiale Pressalit de votre pays, ou de votre distributeur local (pour les pays n'ayant pas de filiale), qui prendra les dispositions nécessaires pour le recyclage des déchets électroniques, conformément à la directive DEEE.</p>



PRESSALIT®

Article	MCT 3 table d'habillage mobile, réglable en hauteur électriquement
Numéro article	R9632719000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®