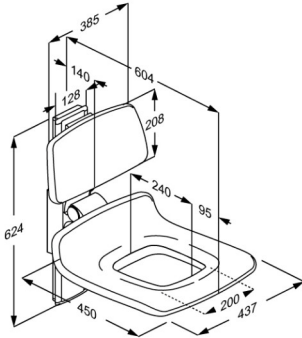




PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS duschsits 450 med hål, manUEllt höjdreglerbar R7425112
Färg	VVS: 777515612 NRF: 6317121 EAN: 5708590359748 HMI: 124344 FDA: INN/D135865 Antracitgrå
Beskrivning	 PLUS duschstolar erbjuds i flera färger. De finns både som fasta, elektriskt justerbara och manUEllt justerbara, med och utan hål, och med möjlighet till rygg och armstöd. De är lämpliga för väggmontering eller för montering på Pressalit PLUS väggskenor. PLUS duschsits 450 med hål, uppfällbart, med ryggstödHöjdreglerbart 380 mm, utan användning av verktyg. Antracitgrå täckplatta på lodrät väggskena. Material: Mjuk och skön PUR-skum med tråkärna, monterade på aluminiumprofil. Exkl. monteringsskruv för vägg. <i>Ersätter R7421</i>
Justerbar Höjdjustering Produktkapacitet	Höjdreglerbar 380 mm Max brukarvikt: 200 kg När duschsitsan belastas med 200 kg, belastas varje fästskruv med 24 kg. <i>PLUS duschsitsar testas statiskt med säkerhetsfaktor 1,5. Detta är i enlighet med kraven i gällande standarder hjälpmiddel.</i>
Material Ergonomi Funktioner	Duschsätet är framställt i anodiserad aluminium och polyuretanskum som är gjutet runt en plywoodkärna och gjuten med en yta av klar PU-lack. Ändarna på ryggstödet och sätet är förseglade med ändpluggar i ABS. Ergonomisk sits - säte 450 x 437 mm. Sitsen är utförd i ett mjukt och halkfritt material som aldrig känns kallt samtidigt som det ger en god sittkomfort. Sits kan fällas upp mot väggen efter användning.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.



PRESSALIT®

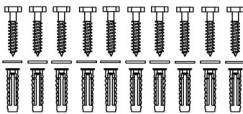
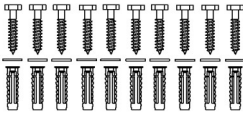
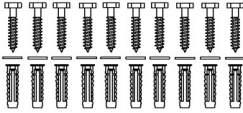
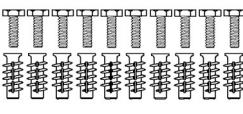
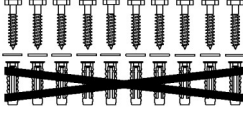
Product	PLUS duschsits 450 med hål, manuellt höjdreglerbar
Varunummer	R7425112
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:Erisan OXY+ Tvättsprit 70% CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH) INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa) Viktigt: PUR-ytor på PLUS duschsitsar och PLUS ryggstöd innehåller en antibakteriell beläggning som kan skadas om den används av annat än såpa och vatten för rengöring. Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.



PRESSALIT®

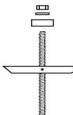
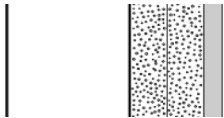
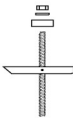
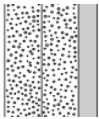
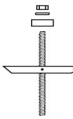
Product	PLUS duschsits 450 med hål, manUEllt höjDreglerbar
Varunummer	R7425112

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8612 - Monteringsset, 10 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8612 - Monteringsset, 10 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= Hlz12 V8612 - Monteringsset, 10 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8662 - Monteringsset, 10 st. bultar M8 x 35 försänkt, plugg FTP M 8. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8612 - Monteringsset, 10 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Använd inte plugg. Måste beställas separat.	



PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS duschsits 450 med hål, manuellt höjdreglerbar R7425112		
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér Monteringsskruv (10 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		 
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringsskruv (10 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		 
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Monteringsskruv (10 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		 

pressalit.com