




PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS toalettarmstöd, 850 mm, med manöverpanel, vänster hand manövrerad R372685112
Färg	VVS: 615878412 NRF: 1617115 EAN: 5708590391137 Antracitgrå
Beskrivning	 Alla toalettstöd PLUS har en integrerad dämparfunktion som säkerställer att stödet sänks kontrollerat från vertikalt till horisontellt läge. PLUS toalettarmstöd med manöverpanel och fjäderbelastning, 850 mm. Höjddreglerbart 150 mm. Uppfällbart. Vänster hand manövrerad Ergonomisk design, som ger skön vila åt armarna och ett optimalt stöd när man skal resa eller sätta sig. Kan endast användas med TL5 toalettlyftar. Monteringsprofil medföljer. Material: Aluminium med greppfast tvåkomponentsplast.
Justerbar Höjjustering	Höjddreglerbar 150 mm
Produktkapacitet	Maximal belastning: 150 kg.
Material	Toalettarmstöden är främst framställt i 10-mikrometer anodiserad aluminium. Greppen är belagda med en glidyta av termoplastisk elastomer (TPE) som omsluter en glasförstärkt nylonkärna. Interna komponenter och fästelement är främst gjorda av rostfritt stål.
Ergonomi	Stabilt stöd i form av ergonomiska toalettarmstöd ger ökad trygghet till den sittande brukaren och underlättar samtidigt den dagliga förflyttningen från och till hjälpmedel. Ett bra toalettarmstöd ger skön vila åt armarna och ett optimalt stöd när man ska resa eller sätta sig.
Funktioner	Toalettstödet undersida är utformad för montering av olika tillbehör.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.

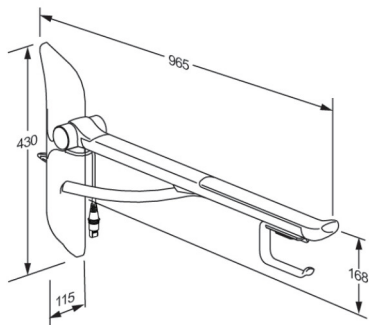

Product	PLUS toalettarmstöd, 850 mm, med manöverpanel, vänster hand manövrerad
Varunummer	R372685112
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Oxyplus-acid 2% (Diversey) WipeClean UniversalCleaning Chlororine Disinfection Wipes INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.
WEEE	Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektronikskrot i enlighet med WEEE-direktivet.