




<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	PLUS ryggstöd, sido reglerbart R6414108
<b>Färg</b>	NRF:6317046 EAN:5708590365473 HMI: 124208 FDA:INN/D135865  Mörkblå (RAL 5011)
<b>Beskrivning</b>	 <p>PLUS ryggstöd finns i flera färger och versioner, de finns både som fasta och justerbara. De är lämpliga för användning bakom en vägghängd toalett utan cisternen eller för montering på en av Pressalits toalettlyftare.</p> <p>PLUS ryggstöd, 385 x 209 mm, vadderad. Sidoreglerbart, för montering på vågrät PLUS väggskena bakom toalett utan cistern. Avtagbar utan verktyg och lätt att fästa igen. Material: Aluminium och mjukt porsukum med tråkärna. Till montering på vågrät PLUS väggskena (ingår ej).</p>
<b>Justerbar</b> <b>Produktkapacitet</b>	Sidoreglerbar  Maximal belastning: 50 kg. Maximal användarvikt: 100 kg. När ryggstödet är belastat med 50 kg, är varje väggmonteringsskruv belastad med 33 kg. <i>Ryggstödet bör kunna bära vikten hos en person som belastar ryggstödet.</i> <b>Ryggstödet är inte personbärande</b> och den testmetoder som föreskrivs för ryggstöd återspeglar detta: ISO 17966 kräver att ryggstöd testas statistiskt med 50% av den maximala användarvikten, dvs när den maximala belastningen på ett ryggstöd är 50 kg, då motsvarar det enligt ISO 17966, att en användare som väger 100 kg belastar ryggstödet.
<b>Garanti</b>	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.

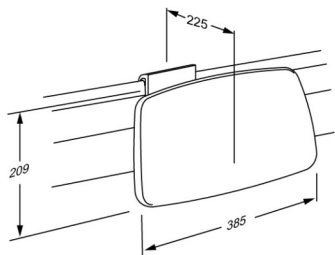

<b>Product</b>	PLUS ryggstöd, sido reglerbart
<b>Varunummer</b>	R6414108
<b>Rengöring</b>	<p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p><b>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b>Erisan OXY+ Tvättspirit 70% CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH)</p> <p><b>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa)</p> <p>Viktigt: PUR-ytor på PLUS duschsitsar och PLUS ryggstöd innehåller en antibakteriell beläggning som kan skadas om den används av annat än såpa och vatten för rengöring.</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p>