




<b>Produkt</b>	MSCT 1 Dusch- und Ankleidewagen, elektrisch höhenverstellbar
<b>Produktnummer</b>	R9434717000
	VVS: 777542410 RSK: 8565087 EAN: 5708590373225 HMI: 128425
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Produkt- beschreibung</b>	 <p>Pressalit bietet eine große Auswahl hoch qualitativer Dusch- und Pflegeliegen in verschiedenen Ausführung. Wir bieten zum Beispiel sowohl Elektrisch höhenverstellbare Dusch- und Pflegeliegen, Nicht höhenverstellbare Dusch- und Pflegeliegen und Mobile, höhenverstellbare Dusch- und Pflegeliegen. Sie bilden eine sichere Basis für die Pflege und das Umkleiden von Erwachsenen und Kindern in den vielfältigsten Einrichtungen</p> <p>Die Liegen können in können in Schulen, Institutionen, Krankenhäusern und in Privathaushalten verwendet werden. Sie zeichnen sich durch eine robuste Oberfläche aus, die sowohl komfortabel als auch sehr leicht zu reinigen ist. Die höhenverstellbare Funktion und die Flexibilität gewährleisten optimale Arbeitsbedingungen für den Helfer sowie ein hohes Maß an Komfort und Sicherheit für den Benutzer.</p> <p>MSCT 1 Duschwagen, 820 x 1790 mm, vier umklappbare Seiten. Elektrisch höhenverstellbar (akkubetrieben) mit Kabelfernbedienung. 400 mm Hubbereich von 550 bis 950 mm. Kann um 3 Grad geneigt werden (für eine einfache Wasserableitung). Ausgestattet mit Zentralverriegelungssystem, Drahtkorb zur Aufbewahrung, Stoßstangen an allen vier Ecken sowie Batterie und Ladegerät. Hebesäulen und Kabelfernbedienung IPX6, Akku und Ladegerät IPX6. Duschmatratze und Kopfstütze müssen separat bestellt werden.</p>
<b>Verstellung</b>	Höhenverstellbar
<b>Höhenverstellung</b>	400 mm



<b>Produkt</b>	MSCT 1 Dusch- und Ankleidewagen, elektrisch höhenverstellbar
<b>Produktnummer</b>	R9434717000
<b>Produktkapazität</b>	Maximales Anwendergewicht (MUM): 200 kg. Maximale Belastung (SWL): 250 kg (Anwender + Wasser + Zubehör). <i>Die Pflegeliege ist mit 625 kg statisch getestet, gemäß den Anforderungen der Norm IEC 60601-1, die eine Prüfung mit einem Sicherheitsfaktor von 2,5 erfordert.</i>
<b>Aufwärtsgeschwindigkeit</b>	Geschwindigkeit aufwärts: 19 mm/s Geschwindigkeit abwärts: 19 mm/s
<b>Materialien</b>	Materialien: Aluminium, Kunststoff, Compact Density Fiberboards (CDF) und lackierter Edelstahl.
<b>Ergonomie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Die ergonomisch geformten Seitengitter des mobilen Duschwagens haben ein praktisches niedriges Mittelstück, welches dem Pflegepersonal einen besseren Zugang und eine bessere Arbeitsumgebung bietet, während die zu pflegende Person auf den Duschwagen versetzt, geduscht, getrocknet, gewechselt und angezogen werden kann.</li><li>• Durch die einhändig bedienbaren Seitengitter kann der Betreuer während des gesamten Vorgangs sowohl Augenkontakt als auch physischen Kontakt mit dem Benutzer aufrechterhalten. Die klappbaren Seitengitter bieten einen einfachen Zugang von allen vier Seiten des Duschwagens.</li><li>• Die verschiedenen Griffmöglichkeiten am Seitengitter ermöglichen es dem Benutzer sich beim Wenden daran festzuhalten. Das gibt dem Benutzer Sicherheit und fördert das Wohlbefinden und die Selbständigkeit bei der Pflege im Duschwagen.</li><li>• Die unter dem Duschwagen angebrachten Drahtkörbe bieten Ablagemöglichkeiten für Accessoires und für weitere Produkte, die für die Pflege in der Dusche benötigt werden. Die Drahtkörbe sind leicht zugänglich und bieten viel Ablagefläche.</li><li>• Die leicht zu reinigenden, glatten Kontaktflächen verhindern, dass sich Schmutz ablagert und Bakterien ansammeln.</li></ul>

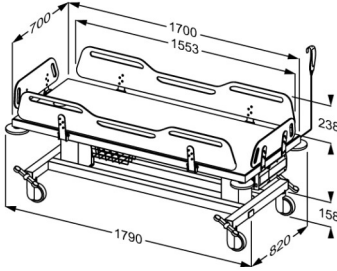

<b>Produkt</b>	MSCT 1 Dusch- und Ankleidewagen, elektrisch höhenverstellbar
<b>Produktnummer</b>	R9434717000
<b>Funktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Der Duschwagen kann für einen einfachen Transport und mehrere Benutzer von Raum zu Raum bewegt werden. Zwei Hebesäulen sorgen für eine ästhetisch ansprechende, hygienisch optimierte, physikalisch und optisch stabile Konstruktion.</li><li>• Intuitive, benutzerfreundliche Dropdown-Seitengitter mit einhändiger Bedienmöglichkeit.</li><li>• Das zentralisierte Bremssystem ermöglicht es dem Betreuer, alle vier Räder gleichzeitig zu blockieren, indem er auf einen einzelnen Bremshebel tritt, um eine bessere Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit in jeder Position zu gewährleisten.</li><li>• Alle Verriegelungs- und Bremssysteme werden aktiviert, indem von oben auf einen der vier Bremshebel getreten wird. Die einfüßige Bedienung ist leicht und schnell auszuführen und verhindert mögliche Verletzungen an den Füßen. Die rutschfeste Oberflächenstruktur aller Bremsen ermöglicht eine sichere Bedienung auch bei Nässe.</li><li>• Ein drehbarer Stoßfänger an jeder Ecke des Wagens schützt die umgebenden Wände und das Produkt selbst bei Kontakt sowie beim Transport von Raum zu Raum.</li><li>• Die Höhenverstellung erfolgt über ein Akku inklusive Ladegerät. Das Wandladegerät für den Akku kann in jedem Raum montiert werden. Wenn der Akku fast leer ist und die Kabelfernbedienung betätigt wird, ertönt ein Piepton.</li><li>• Die Ladezeit des Akkus beträgt ca. 3-4 Stunden.</li><li>• Das MSCT 1 verfügt außerdem über einen abgesenkten Entwässerungsbereich, der Wasser aus den Ecken entfernt und die Menge des übrig gebliebenen Wassers für eine einfache Entwässerung und Trocknung reduziert.</li><li>• Ein offener Abfluss und ein vergrößerter 1,6 m Schlauch sorgen für eine einfache Entwässerung, durch die sogar menschliche Ausscheidungen gelangen kann. Die empfohlene Neigung für eine effiziente Wasserableitung sind 3 Grad.</li></ul>
<b>Stromanschluss (V)</b>	230
<b>Motor</b>	BL1 (Linak) IPX6
<b>Steuerkasten</b>	COL50 (Linak) IPX6
<b>Kabelgebundener Fernbedienung</b>	HB30 (Linak) IPX6
<b>Stromverbrauch (max. Belastung)</b>	Stromverbrauch, maximal Belastung: 80,5 W Stromverbrauch, standby: 0,5 W



<b>Produkt</b>	MSCT 1 Dusch- und Ankleidewagen, elektrisch höhenverstellbar
<b>Produktnummer</b>	R9434717000
<b>Garantie</b>	Für alle Pressalit-Hilfsmittel gewähren wir innerhalb von drei Jahren ab Rechnungsdatum Garantie auf Material- und Herstellungsfehler. Im Falle eines nachweisbaren Mangels erfolgt eine kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung nach unserem Ermessen.
<b>Reinigung</b>	<p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p><b>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes</p> <p><b>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p>
<b>WEEE</b>	Bitte kontaktieren Sie, im Falle des Entsorgungswunsches von Elektroschrott, die lokale Pressalit Tochtergesellschaft, die sich um die umweltgerechte Entsorgung, nach WEEE Vorschriften, kümmern wird.



# PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	MSCT 1 Dusch- und Ankleidewagen, elektrisch höhenverstellbar
<b>Produktnummer</b>	R9434717000

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®