




PRESSALIT®

Product Varunummer	VALUE II toalettarmstöd, 850 mm R1181000
Färg	VVS:615892100 NRF:6191059 EAN:5708590373010 HMI: 138203 FDA: ILS/D135866 Vit
Beskrivning	 VALUE och VALUE II toalettstöd med ALBA vingmonteringsprofil är speciellt utformade för användning med SELECT TL3 och TL4 toalettlyftare. Höjdjustering av den elektriska toalettlyften görs med hjälp av en manöverpanel som ingår i toalettstödet. VALUE II toalettarmstöd, 850 mm, uppfällbart, höjdreglerbart 150 mm utan verktyg (höger hand manövrerad). En bra hjälp när du sitter, står eller flyttning till och från toaletten. Material: Stål med en Rilsan-belagd yta och gjuten aluminium. Till eftermontering på TL3/TL4 elektrisk/manuell upphängning till toalett, monteringsprofil medföljer. Montering vänstersidig för brukar.
Justerbar Höjdjustering	Höjdreglerbar 150 mm
Produktkapacitet	Maximal belastning: 120 kg
Material Ergonomi	Toalettarmstöden är tillverkad av rostfritt stål med en Rilsan-belagd yta som är skön att röra vid, lätt att rengöra och skyddar mot rost. Monteringsprofil i gjuten aluminium. VALUE II toalettarmstöd med ALBA-vinge, 850 mm, vit. Höjdreglerbart, högersidig justering, till eftermontering på TL3/TL4 (vänster)
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.

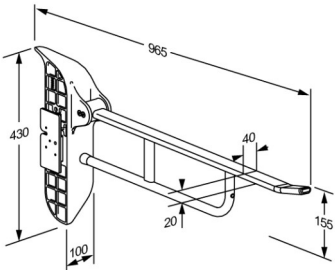

PRESSALIT[®]

Product	VALUE II toalettarmstöd, 850 mm
Varunummer	R1181000
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. För rengöring av ytan kan klorinbaserade desinficeringsmedel användas enligt produktspecifikationen och säkerhetsföreskrifterna för de här produkterna. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättssprit 70% WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes Klorilli (Kiilto Clean) INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.



PRESSALIT®

Product	VALUE II toalettarmstöd, 850 mm
Varunummer	R1181000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®