




<b>Produkt</b>	VALUE II toiletstøtte, 850 mm
<b>Varenummer</b>	R1181000
<b>Farve</b>	Hvid
<b>Produktbeskrivelse</b>	<p>VVS:615892100 NRF:6191059 EAN:5708590373010 HMI: 138203</p>  <p>VALUE og VALUE II toiletstøtter med ALBA-vinge-monteringsprofil er specielt designet til anvendelse sammen med SELECT TL3 og TL4 toiletløftere. Højderegulering af den elektriske toiletløfter foretages ved hjælp af betjeningspanel som medfølger toiletstøtten.</p> <p>VALUE II toiletstøtte, 850 mm, opklappelig, højderegulerbar 150 mm uden brug af værktøj (højrehåndsbetjent). En god hjælp, når man sidder, står, eller skal forflytte sig ved toiletlet. Materialer: Rilsan-belagt stål og trykstøbt aluminium. Til eftermontering på TL3/TL4 elektrisk/manuel toiletløfter, ALBA-vinge-monteringsprofil medfølger. Monteres til venstre for bruger.</p>
<b>Justerbarhed</b>	Højderegulerbar
<b>Reguleringshøjde</b>	150 mm
<b>Produktkapacitet</b>	Maksimal belastning: 120 kg.
<b>Materialer</b>	Toiletstøtten er fremstillet af rustfrit stål med en Rilsan-belagt overflade, som er behagelig at røre ved, let at rengøre, og som giver god beskyttelse mod rust. Monteringsprofilerne er fremstillet af trykstøbt aluminium.
<b>Ergonomi</b>	VALUE II toiletstøtte med ALBA-vinge, 850 mm, hvid. Højderegulerbar, højrehåndsbetjent, til eftermontering på TL3/TL4 (venstre)
<b>Garanti</b>	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



<b>Produkt</b>	VALUE II toiletstøtte, 850 mm
<b>Varenummer</b>	R1181000
<b>Rengøring</b>	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Klorbaserede desinfektionsmidler kan bruges til desinfektion af overflader i henhold til produktspecifikationen og sikkerhedsforanstaltninger for disse produkter.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p><b>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70% WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes Klorilli (Kiilto Clean)</p> <p><b>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p>
<b>Overensstemmelses- erklæring</b>	<p>Dette produkt er fremstillet i henhold til relevante krav i rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr.</p>

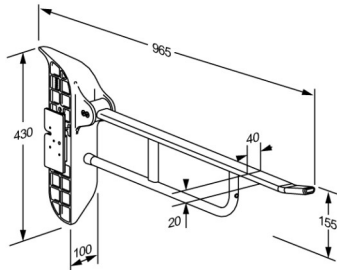

# PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	VALUE II toiletstøtte, 850 mm
<b>Varenummer</b>	R1181000

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®