




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	VALUE II toiletsteun, in hoogte verstelbaar R1119000
Kleur	VVS:615891200 NRF:6191058 RSK:8487435 EAN:5708590367583 HMI: 123559 FDA: ILS/D135866 Wit
Beschrijving	 VALUE II toiletsteun, wandmontage, opklapbaar, in hoogte verstelbaar 150 mm, lengte 865 mm. Het ergonomische ontwerp zorgt voor een veilige en comfortabele grip en een goed gevoel van waar de toiletsteun eindigt. Incl. bevestigingsbouten voor bakstenen muur. Bevestigingsmateriaal is afhankelijk van het wand type en moet apart besteld worden. VALUE II toiletsteun, wandmontage, opklapbaar, in hoogte verstelbaar 150 mm, lengte 865 mm. Het ergonomische ontwerp zorgt voor een veilige en comfortabele grip en een goed gevoel van waar de toiletsteun eindigt. Materialen: Rilsan-gecoat staal, gegoten aluminium, kunststof. Incl. bevestigingsbouten voor bakstenen muur. Bevestigingsmateriaal is afhankelijk van het wand type en moeten apart besteld worden.
Verstelbaarheid Afstelhoogte Product capaciteit	In hoogte verstelbaar 150 mm Maximale belasting: 120 kg. Wanneer de toiletsteun wordt belast met 120 kg, wordt elke wandbevestiging belast met 86 kg.
Materialen Ergonomy	De toiletsteun is vervaardigd uit staal met een Rilsan-coating, die comfortabel aanvoelt, eenvoudig te reinigen is en het metaal beschermt tegen corrosie. Geeft stevige ondersteuning bij zitten, opstaan of overstappen naar en van een toilet. Goed, breed steunvlak voor hand en arm. De afgeronde vorm geeft een stevige en comfortabele grip.

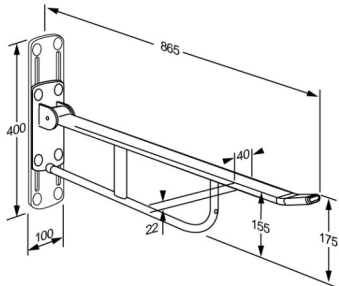

PRESSALIT®

Product	VALUE II toiletsteun, in hoogte verstelbaar
Artikelnummer	R1119000
Functie	De toiletsteun kan worden opgeklapt wanneer deze niet in gebruik is of om meer ruimte te maken. Hoogte verstelbaar 150 mm.
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum.
Reiniging	Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak. Desinfectiemiddelen op chloorbasis voor het desinfecteren van oppervlakken mogen worden gebruikt volgens de productspecificatie en veiligheidsmaatregelen voor deze producten. De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden. DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes Klorilli (Kilto Clean) NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken anders kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.



PRESSALIT®

Product	VALUE II toiletsteun, in hoogte verstelbaar
Artikelnummer	R1119000

Installatie in verschillende wandtypes

	Betonwanden >B25 V8592 - 5 verzonken schroeven Ø10 x 80, met witte schroefafdekkingen zijn inbegrepen. Pluggen moeten apart worden besteld.	
	Gemetselde wanden >= Mz12 V8592 - 5 verzonken schroeven Ø10 x 80, met witte schroefafdekkingen zijn inbegrepen. Pluggen moeten apart worden besteld.	
	Kalksteen>=Hlz12 V8592 - 5 verzonken schroeven Ø10 x 80, met witte schroefafdekkingen zijn inbegrepen. Pluggen moeten apart worden besteld.	
	Gasbeton P4 V8592 - 5 verzonken schroeven Ø10 x 80, met witte schroefafdekkingen zijn inbegrepen. Pluggen moeten apart worden besteld.	
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout V8592 - 5 verzonken schroeven Ø10 x 80, met witte schroefafdekkingen zijn inbegrepen. Pluggen moeten apart worden besteld.	



PRESSALIT®

Product Artikelnummer	VALUE II toiletsteun, in hoogte verstelbaar R1119000
	Gipsplaten, watervast, versterkt met hout Muurbevestigingen (5 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.   
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal Muurbevestigingen (5 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.   
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren. 

It is the responsibility of the installer to ensure that suitable wall fasteners are used.

pressalit.com