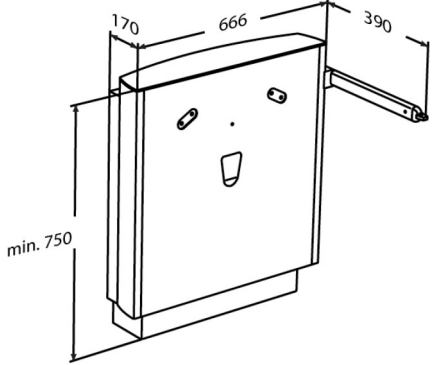




<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	SELECT muurframe voor wastafel, wandmontage met vloersteun, elektrisch in hoogte verstelbaar met bedieningshendel. R4950000
<b>Kleur</b>	VVS: 654005100 NRF: 6132541 EAN: 5708590324050 HMI: 82618 NBS: N13:30,335 Wit
<b>Beschrijving</b>	 <p>SELECT wastafel muurframe, staand. Elektrisch in hoogte verstelbaar 300 mm met bedieningshendel. Aanbeveling: flexibel aanvoer/afvoersysteem. Incl. bevestigingsbouten voor wastafel (aanbevolen met MATRIX SMALL en MATRIX CURVE/NEW CURVE wastafels). Excl. bevestigingsmateriaal. Zie technische handleiding (PDF) voor informatie over bevestigingen geschikt voor verschillende wandtypes.</p> <p>SELECT wastafel muurframe, staand. Elektrisch in hoogte verstelbaar 300 mm met bedieningshendel. Aanbeveling: flexibel aanvoer/afvoersysteem. Incl. bevestigingsbouten voor wastafel (aanbevolen met MATRIX SMALL en MATRIX CURVE/NEW CURVE wastafels). <b>Wij adviseren sifon R2076 toe te passen als stankafsluiter op de afvoer.</b> Excl. bevestigingsmateriaal. Materialen: Geanodiseerd aluminium en polystyreen (PS). Excl bevestigingsset.</p>
<b>Verstelbaarheid</b> <b>Afstelhoogte</b>	In hoogte verstelbaar 300 mm



<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	SELECT muurframe voor wastafel, wandmontage met vloersteun, elektrisch in hoogte verstelbaar met bedieninghendel. R4950000
<b>Product capaciteit</b>	Maximale belasting: 150 kg. Geschikt voor wastafels die tot 22 kg wegen. Wanneer de wastafel is geladen met 150 kg, zal elke wandbevestiging met 18 kg zijn belast. <i>Het wastafel muurframe moet het gewicht van het wastafel kunnen dragen, alsmede het gewicht van de persoon die tegen de wastafel leunend of die de wastafel gebruikt om uit zittende positie te stijgen.</i> <b>De wastafel is niet bedoeld om een persoon te vervoeren, en de testmethoden die van toepassing zijn op het muurframe van het wastafel weerspiegelen dit: ISO 17966 schrijft een statische test voor aan de voorzijde van de wastafel bij 75% van het maximale gebruikersgewicht, d.w.z. Wanneer de maximale belasting op een wastafel muurframe wordt gegeven als 150 kg en de wastafel 22 kg weegt, is het – volgens ISO 17966 – het equivalent van een gebruiker met een gewicht van 171 kg leunend op de voorzijde van de wastafel m.</b>
<b>Opwaartse snelheid</b>	Speed up mm: 21 mm/s Speed down mm: 21 mm/s
<b>Noise level</b>	45 dB
<b>Materialen</b>	Geanodiseerd aluminium. De frontplaten zijn gemaakt van polystyreen (PS).De bovenplaat en compact laminaat. <i>Ontvlambaarheid getest (ISO 8191-1 en ISO 8191-2). Testrapport beschikbaar.</i>
<b>Ergonomy</b>	Het strikte en zuivere ontwerp van de afdekplaat/lift en de gladde oppervlakken zijn eenvoudig te reinigen en aantrekkelijk om naar te kijken. Ze helpen ook bij het garanderen van een goede hygiëne in de badkamer. De exclusieve aluminium profielen zijn licht, duurzaam en elegant om naar te kijken.
<b>Funktie</b>	De wastafel wordt omhoog of omlaag gebracht met behulp van de bedieninghendel aan het uiteinde van de wastafel. De hendelbediening kan aan beide zijden van de wastafel worden geplaatst en dient ook als handdoekhouder. De bediening van de hendel zijn sterk genoeg om als extra ondersteuning te worden gebruikt.
<b>Mains connection (V)</b>	230
<b>Power consumption (maximale belasting)</b>	Power consumption by maximum load: 75 W Power consumption by standby: 1,5 W
<b>Garantie</b>	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf vijf jaar na de factuurdatum.

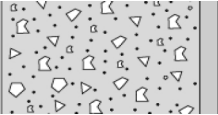
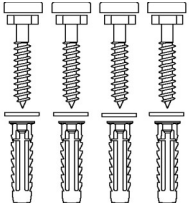

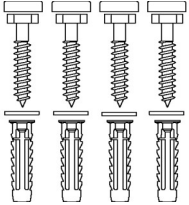
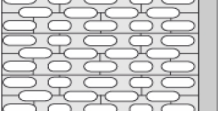
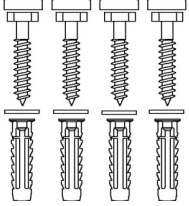
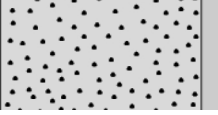
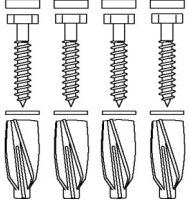
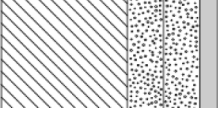
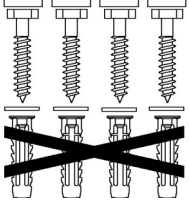


<b>Product</b>	SELECT muurframe voor wastafel, wandmontage met vloersteun, elektrisch in hoogte verstelbaar met bedieninghendel.
<b>Artikelnummer</b>	R4950000
<b>Reiniging</b>	<p>Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen.</p> <p>De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden.</p> <p><b>DESINFECTEERMIDDELEN:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70%</p> <p><b>NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken ander kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.</p> <p><b>ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN:</b> Pressalit raadt aan om kalkaanslag op de muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van 30% schoonmaakazijn en 70 % leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn schoon gemaakt, moeten de onderdelen worden afgeveegd met met schoon water bevochtigde uitgewrongen doek. "</p>
<b>Conformiteitsverklaring</b>	<p>Het product is geproduceerd in overeenstemming met relevante eisen in:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen</li><li>- Machinerichtlijn 2006/42/EEG</li><li>- RoHS-richtlijn 2011/65/EG.</li></ul>

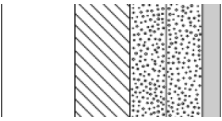
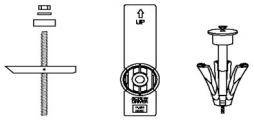
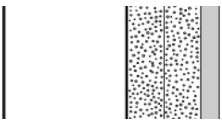
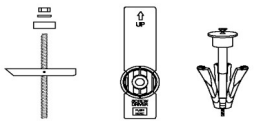
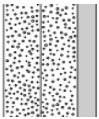
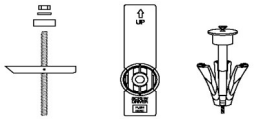


<b>Product</b>	SELECT muurframe voor wastafel, wandmontage met vloersteun, elektrisch in hoogte verstelbaar met bedieninghendel.
<b>Artikelnummer</b>	R4950000

## Installatie in verschillende wandtypes

	<b>Betonwanden &gt;B25</b> V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Gemetselde wanden &gt;= Mz12</b> V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Kalksteen&gt;=Hlz12</b> V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Gasbeton P4</b> V8655 - Bevestigingsmateriaal, 4 bouten Ø10 x 70, pluggen GB14, met grijze afdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout</b> V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	



<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	SELECT muurframe voor wastafel, wandmontage met vloersteun, elektrisch in hoogte verstelbaar met bedieninghendel. R4950000
	<b>Gipsplaten, watervast, versterkt met hout</b> Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks. 
	<b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal</b> Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks. 
	<b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast</b> Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks. 

It is the responsibility of the installer to ensure that suitable wall fasteners are used.