




PRESSALIT®

Article Numéro article	VALUE II barre de relèvement, 850 mm, avec panneau de commande R1183000
Couleur	Blanc
Description	<p>VVS:615892300 NRF:6191061 EAN:5708590373034 HMI: 138210</p>  <p>VALUE et VALUE II barres de relèvement avec l'aile ALBA profil de montage sont conçus pour usage avec SELECT TL3 et TL4 ensembles wc. Le réglage en hauteur électrique de l'ensembles wc est fait uniquement avec le panneau de commande sur la barre de relèvement.</p> <p>VALUE II barre de relèvement, avec panneau de commande pour TL3/TL4, 850 mm, rabattable, réglable en hauteur 150 mm sans outils (par la main gauche). Fournit un soutien ferme en position assise, debout ou lors du transfert vers et depuis les toilettes. Materiaux : acier revêtu de Rilsan et aluminium moulé sous pression. Pour montage sur TL3/TL4 ensemble wc électrique, aile ALBA profil de montage inclus. Pour montage sur le côté droite de l'utilisateur.</p>
Réglage	Réglable en hauteur
Hauteur de réglage	150 mm
Capacité du produit	Charge maximale admissible : 120 kg
Materiaux	La barre de relèvement est fait en acier revêtu de Rilsan qui est confortable à toucher, facile à nettoyer et qui protège contre la corrosion. La profil de montage est fait en aluminium moulé sous pression.
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.

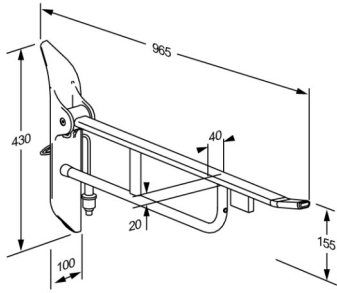

Article	VALUE II barre de relèvement, 850 mm, avec panneau de commande
Numéro article	R1183000
Nettoyage	<p>Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs et corrosifs, car cela pourrait endommager la surface. Pour désinfecter la surface, des désinfectants peuvent être utilisés en tenant compte des caractéristiques et des précautions de sécurité liées à ces produits.</p> <p>Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage.</p> <p>NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningsprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% WipeClean UniversalCleaning Chloroline Disinfection Wipes Klorilli (Kiilto Clean)</p> <p>NETTOYANTS NON-DÉSINFECTANTS : Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.</p>
WEEE	Renseignez-vous auprès de la filiale Pressalit de votre pays, ou de votre distributeur local (pour les pays n'ayant pas de filiale), qui prendra les dispositions nécessaires pour le recyclage des déchets électroniques, conformément à la directive DEEE.
Déclaration de conformité	Ce produit répond aux exigences propres à : - la réglementation (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux - la directive 2011/65/UE sur RoHS.



PRESSALIT®

Article	VALUE II barre de relèvement, 850 mm, avec panneau de commande
Numéro article	R1183000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®