




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	PLUS Duschsitz 310, manuell höhenverstellbar und manuell seitlich verschiebbar R7364112
Farbe Produkt- beschreibung	VVS: 777513512 NRF: 6317098 EAN: 5708590359441 HMI: 124245 FDA: INN/D135865 Anthrazitgrau  PLUS Duschsitze werden in verschiedenen Farben angeboten. Sie sind sowohl in fester Höhe, elektrisch höhen- verstellbar als auch manuell verstellbar, und sowie wahlweise mit Rücken- und Armlehnen erhältlich. Sie eignen sich zur Montage an der Wand oder zur Montage an Pressalit PLUS Wandschienen. PLUS Duschsitz 310, mit Rückenlehne und Armlehnen. Um 250 mm höhenverstellbar und seitlich verschiebbar. Die Armlehne sind unabhängig von Sitz und Rückenlehne höhenverstellbar. Hochklappbare Sitz und Armlehnen. Anthrazitgraue Abdeckplatte auf Wandschiene. Zur Nachmontage auf waagerechter PLUS Wandschiene (nicht enthalten). Materialien: weicher und komfortabler PUR-Schaum mit Holzkern, montiert auf einem Aluminiumprofil. Die Armlehne aus weichem SEBS-Kunststoff sind griffig und rutschfest.
Verstellung Höhenverstellung Produktkapazität	Höhen- und seitlich verstellbar 250 mm Maximales Anwendergewicht (Sitz): 200 kg. Maximale Belastung der Armlehnen: 55 kg. Bei einer Belastung der Duschsitz mit 200 kg, wird jede Montageschraube folglich mit bis zu 21 kg. <i>PLUS Duschsitze wurden statisch mit einem Sicherheitsfaktor 1,5 getestet. Dies entspricht den Anforderungen der geltenden Normen.</i>

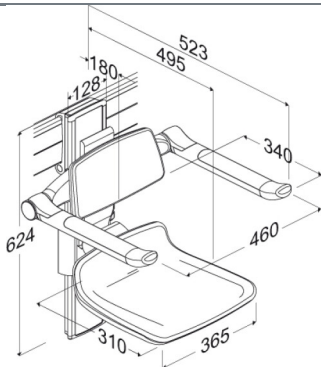

Produkt	PLUS Duschsitz 310, manuell höhenverstellbar und manuell seitlich verschiebbar
Produktnummer	R7364112
Materialien	Der Duschsitz besteht vorwiegend aus Aluminium mit einer 10 µm Eloxalschicht. Sitz und Rückenlehne sind aus PUR-Schaumstoff hergestellt. Beide sind mit einer Oberflächenbeschichtung versehen und mit PUR-Klarlack geschützt. Sitz beinhaltet Sperrholzkern. Die Armlehnen bestehen vorwiegend aus Aluminium mit einer 10 µm Eloxalschicht und sind an den Enden mit einer rutschfesten, griffigen Oberfläche aus weichem SEBS-Kunststoff mit glasfaserverstärktem Nylonkern versehen. Auch der Scharnierarm ist mit weichem SEBS-Kunststoff überzogen. Interne Komponenten und Halterungen sind vorwiegend in Edelstahl ausgeführt. Die Kanten der Rückenlehne und Sitzträger sind mit Abdeckungen aus ABS-Polymer versiegelt.
Ergonomie	Ergonomischer Sitz - Sitzfläche 310 x 365 mm. Das weiche und rutschfeste Material fühlt sich nie kalt an und bietet zugleich einen guten Sitzkomfort. Die ovale Form der Armlehne stützt und bietet einen guten, komfortablen Halt.
Funktionen	Der Duschsitz und die Armlehnen sind hochklappbar, so dass nach Bedarf zusätzliche Bewegungsfläche geschaffen werden kann. Mit Hilfe eines einfachen und sicheren Klicksystems lässt sich Sitzfläche, Rücken und Armlehne gleichzeitig einstellen. Die Armlehne sind darüber hinaus unabhängig von Sitz und Rückenlehne höhenverstellbar. Der Duschsitz lässt sich einfach verschieben.
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.



Produkt	PLUS Duschsitz 310, manuell höhenverstellbar und manuell seitlich verschiebbar
Produktnummer	R7364112
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Erisan OXY+ Tvättspit 70% CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH) NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa) Wichtig: PUR-Oberflächen von PLUS Duschsitze und PLUS Rückenlehne erhalten ein anti-bakterielles Coating, das durch andere Reinigung als Wasser und Seife zerstört werden kann. Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können. ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE: Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden. Diese Produkt ist gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert worden.
Konformitäts- erklärung	



PRESSALIT®

Produkt	PLUS Duschsitz 310, manuell höhenverstellbar und manuell seitlich verschiebbar
Produktnummer	R7364112

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®