




| | |
|--|--|
| Product Artikelnummer | PLUS valpreventie beugel, 450-520 mm RT873108 |
| Kleur | VVS:777539008 NRF:6317196 EAN:5708590314174 HMI: 124198 NBS:N13:426 FDA:INN/D135865 Donkerblauw (RAL 5011) |
| Beschrijving |  <p>PLUS valpreventie beugeln zijn verkrijgbaar in drie verschillende lengtes en kunnen ook als rugsteun worden gebruikt.</p> <p>PLUS valpreventie beugel, 450 - 520 mm. Voor PLUS douchezitting 310 en PLUS toiletsteunen</p> |
| Product capaciteit | Maximale belasting 70 kg |
| Materialen Ergonomy Functie | Staal en kunststof Stabiliseert en corrigeert de gebruiker met een verminderde lichaamsbalans. Voor mensen met een lichamelijke handicap, met name degenen met een beperkte kracht/stabiliteit van het bovenlichaam, of degenen die lijden aan onwillekeurige bewegingen of toevallen, is het een reëel risico om voorover van het toilet te vallen. In tegenstelling tot riemen en riemen, die kunnen knellen en oncomfortabel tegen de huid kunnen zitten, worden deze verstelbare voor- en rugleuningen rechtstreeks tussen twee PLUS-toiletsteunen of tussen de arMLEUNINGEN van een PLUS-douchezitting bevestigd. Hierdoor worden gebruikers veilig en comfortabel op hun plaats gehouden, wat hun veiligheid en functionaliteit verbetert, terwijl deze ook verzorgers helpen en meer gemoedsrust bieden. |
| Garantie | Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum. |

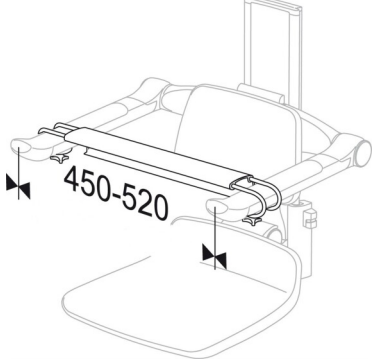

| | |
|----------------------|---|
| Product | PLUS valpreventie beugel, 450-520 mm |
| Artikelnummer | RT873108 |
| Reiniging | <p>Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiner. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen.</p> <p>De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden.</p> <p>DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättssprit 70%</p> <p>NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken ander kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.</p> <p>ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN: Pressalit raadt aan om kalkaanslag op de muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van 30% schoonmaakazijn en 70 % leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn schoon gemaakt, moeten de onderdelen worden afgeveegd met met schoon water bevochtigde uitgewrongen doek.</p> |