




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	PLUS valpreventie beugel, 550-620 mm RT874035
Kleur	VVS:777539135 NRF:6317197 EAN:5708590314198 HMI: 124195 NBS:N13:426 FDA:INN/D135865 Rood (RAL 3003)
Beschrijving	 <p>PLUS valpreventie beugeln zijn verkrijgbaar in drie verschillende lengtes en kunnen ook als rugsteun worden gebruikt.</p> <p>PLUS valpreventie beugel, 550 - 620 mm. Voor PLUS douchezitting 450 en PLUS toiletsteunen.</p>
Product capaciteit	Maximale belasting: 70 kg
Materialen	Staal en kunststof
Ergonomy	Stabiliseert en corrigeert de gebruiker met een verminderde lichaamsbalans.
Functie	Voor mensen met een lichamelijke handicap, met name degenen met een beperkte kracht/stabiliteit van het bovenlichaam, of degenen die lijden aan onwillekeurige bewegingen of toevallen, is het een reëel risico om voorover van het toilet te vallen. In tegenstelling tot riemen en riemen, die kunnen knellen en oncomfortabel tegen de huid kunnen zitten, worden deze verstelbare voor- en rugleuningen rechtstreeks tussen twee PLUS-toiletsteunen of tussen de arMLEUNINGEN van een PLUS-douchezitting bevestigd. Hierdoor worden gebruikers veilig en comfortabel op hun plaats gehouden, wat hun veiligheid en functionaliteit verbetert, terwijl deze ook verzorgers helpen en meer gemoedsrust bieden.
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum.

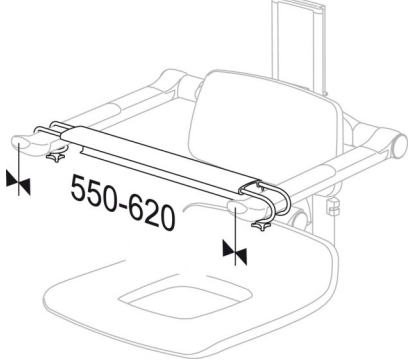

Product	PLUS valpreventie beugel, 550-620 mm
Artikelnummer	RT874035
Reiniging	<p>Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen.</p> <p>De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden.</p> <p>DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättssprit 70%</p> <p>NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken ander kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.</p> <p>ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN: Pressalit raadt aan om kalkaanslag op de muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van 30% schoonmaakazijn en 70 % leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn schoon gemaakt, moeten de onderdelen worden afgeveegd met met schoon water bevochtigde uitgewrongen doek.</p>