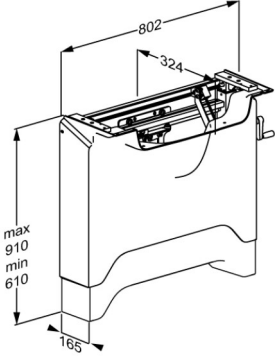




PRESSALIT®

<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	MATRIX manuell upphängning till tvättställ R482019000
<b>Färg</b>	Vit
<b>Beskrivning</b>	<p>VVS: 654021700 NRF: 6132468 EAN: 5708590380957 HMI: 137771</p>  <p>MATRIX tvättställs upphängning är skräddarsydda efter MATRIX tvättställ. De finns i elektriska och manuellt höjjusterbara och sidoreglerbart versioner, samt fastmonterade versioner, alla med ett hygieniskt installationsskydd för att dölja VVS-installationerna.</p> <p>MATRIX MEDIUM Upphängning till tvättställ, vägghängda, med vit monteringskåpa, inkl. till- och avloppssystem och vattenlås (R2058). Manuell höjreglerbart med handvevsmanövrering 300 mm, och manuell sidoreglerbart 500 mm. Inkl. monteringskruvar till tvättställ (Endast för MATRIX MEDIUM tvättställ, R2120/R2121) Material: Rostfritt stål och ABS-plast/akrylplast. Pulverlackerat rostfritt stål, PMMA, ABS och polystyren. Exkl. monteringskruv för vägg.</p>
<b>Justerbar</b> <b>Höjjustering</b>	Höjd- och sidoreglerbar 300 mm



# PRESSALIT®

<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	MATRIX manuell upphängning till tvättställ R482019000
<b>Produktkapacitet</b>	<p>Maximal användarvikt (MUM): 160 kg. Maximal belastning: 150 kg. Lämplig för tvättställ upp till 30 kg. När tvättstället är belastat med 150 kg, är varje väggmonteringsskruv belastad med 60 kg.</p> <p><i>Tvättställsupphängningen bör kunna bära tvättställets vikt, liksom vikten hos en person som belastar tvättstället eller använd tvättstället som ett stöd att dra sig upp.</i></p> <p><b>Varken tvättstället eller tvättställsupphängningen är personbärande och den testmetoder som föreskrivs för upphängningsfunktionen återspeglar detta: ISO 17966 kräver att upphängning testas statiskt vid tvättställets framkant med 75% av den maximala användarvikten, dvs när den maximala belastningen på ett tvättställ är 150 kg och tvättstället väger 30 kg, då motsvarar det enligt ISO 17966, att en användare som väger 160 kg belastar tvättstället.</b></p>
<b>Material</b>	Pulverlackerat rostfritt stål, PMMA, ABS och polystyren.
<b>Garanti</b>	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.

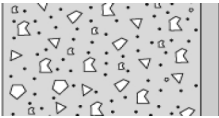
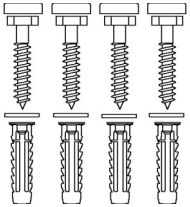

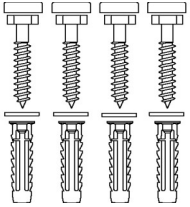
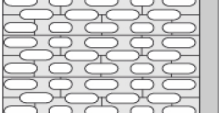
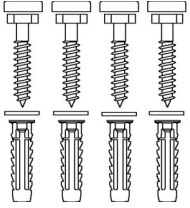
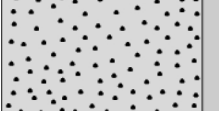
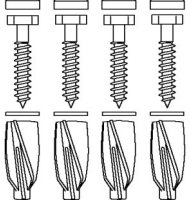
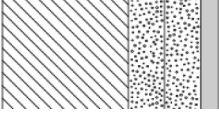
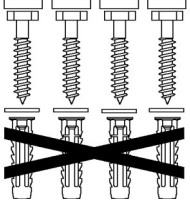


<b>Product</b>	MATRIX manuell upphängning till tvättställ
<b>Varunummer</b>	R482019000
<b>Rengöring</b>	<p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. För rengöring av ytan kan klorinbaserade desinficeringsmedel användas enligt produktspecifikationen och säkerhetsföreskrifterna för de här produkterna.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p><b>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättspit 70%</p> <p><b>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p>
<b>Överensstämmelses deklaration</b>	<p>Denne produkt är tillverkad i enlighet med: - Förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter - Maskindirektivet 2006/42/EEG</p>

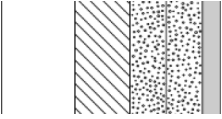
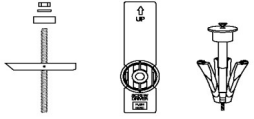
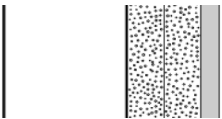
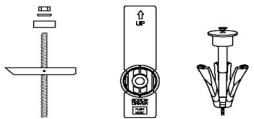
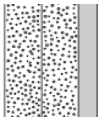
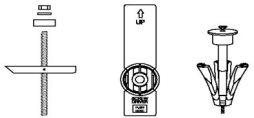


<b>Product</b>	MATRIX manuell upphängning till tvättställ
<b>Varunummer</b>	R482019000

## Montage i olika väggtyper

	<b>Betong &gt;B25</b> V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	<b>Mursten &gt;= Mz12</b> V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	<b>Cementsten &gt;= Hlz12</b> V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	<b>Lättbetong P4</b> V8655 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	<b>Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä</b> V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med vita täckknappar. Använd inte plugg. Måste beställas separat.	



<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	MATRIX manuell upphängning till tvättställ R482019000	
	<b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfänér</b> Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.	
	<b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm</b> Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.	
	<b>Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2</b> Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.	

Det är installatörens ansvar att säkerställa att korrekt fastsättning sker.