



# PRESSALIT®

**Abattant Dania avec couvercle, 100 mm surélevé**  
**Avec plots stabilisateurs et charnières spéciales pour abattant**  
**surélevé. Avec conduit protecteur.**

**Numéro article**




R34000  
 VVS: 615687000  
 NRF: 6191646  
 EAN: 5708590070537  
 HMI: 1814  
 NBS: N13:300  
 DB: 2296034

**Couleur**

Blanc

**Description**

Abattant Dania, surélevé 100 mm, avec couvercle.  
 Equipé de charnières renforcées

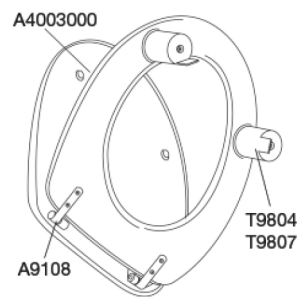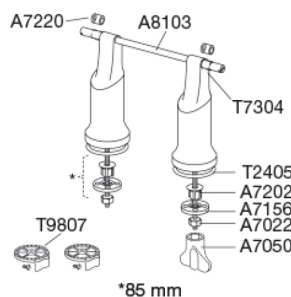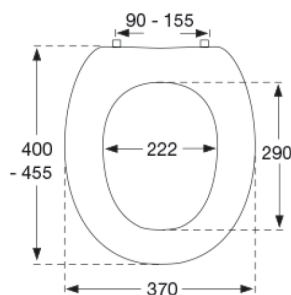

**Matériaux**

**Abattant :**  
 Plastique thermodurci (UF A 10 = urée-formaldéhyde) coloré dans la masse, exempt de tout matériau portant atteinte à l'environnement. Le plastique UF contient environ 70 % de résine d'urée-formaldéhyde, 30 % de cellulose et 5% de minéraux, de pigments, de lubrifiants et d'humidité. Le formaldéhyde libre s'évapore pendant le processus de production. Les abattants de toilette Pressalit, mesurés après durcissement ( $< 0,01 \text{ mg/m}^3$ ), émettent largement en dessous de la limite autorisée dans l'UE de  $0,08 \text{ mg/m}^3$ .

**Plots stabilisateurs :**  
 EVA (copolymère éthylène-acétate de vinyle).

**Charnières :**  
 Acier inoxydable et thermoplastique.

**Capacité du produit**

Ce produit a été testé statiquement jusqu'au 225 kg. Car la norme européenne NF/EN 12182:2012 concernant les produits d'assistance pour personnes en situation de handicap exige un test statique avec un facteur de sécurité de 1,5, la charge maximale admissible pour ce produit est de 150 kg.

**Poids net**

4,5 kg

**Poids de carton**

5,1 kg



# PRESSALIT®

---

**Abattant Dania avec couvercle, 100 mm surélevé**  
**Avec plots stabilisateurs et charnières spéciales pour abattant**  
**surélevé. Avec conduit protecteur.**

---

**Poids de colis** 5,1 kg

**Nombre par colis** 1

**Colis par palette** 24

**Nombre par palette** 24

**Nettoyage** Utilisez un produit de nettoyage savonneux doux pour le nettoyage de l'abattant de WC. Assurez-vous de ne pas laisser d'humidité sur le siège et les charnières. Il est important que l'abattant est essuyé et séché juste après la désinfection à l'aide d'un tissu doux. Si des produits de nettoyage des toilettes ou d'autres produits de nettoyage comportant du chlore, abrasifs ou corrosifs entrent en contact avec le siège et les charnières, cela peut entraîner des dommages ou de la rouille. C'est pourquoi le siège doit être mis en position verticale, jusqu'à ce que tout le produit de nettoyage de toilettes ait été rincé et enlevé.

**Garantie** Une garantie de 10 ans sur le produit s'applique à votre siège de toilette Pressalit sur présentation de la facture originale pour valider la date d'achat. Pour toute réclamation, s.v.p. veuillez contacter votre revendeur. Pour toute défaillance matérielle ou de fabrication ou pour toute altération des propriétés fonctionnelles de votre abattant après un usage et un entretien normal (ce que nous nous réservons le droit de vérifier en usine) dans le cadre de la garantie, Pressalit s'engage à vous fournir des pièces de rechange ou à remplacer votre abattant contre un modèle identique ou similaire. Pressalit se réserve le droit de fournir un modèle de couleur blanche si la teinte d'origine n'est plus disponible. Lors du remplacement ou de la livraison d'une pièce de rechange, la période de garantie ne sera ni prolongée ni renouvelée. Si l'échange est impossible, la garantie prévoit que Pressalit vous rembourse le montant de l'achat.

Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---