




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	VALUE IV rugsteun, vaste montage R1661000112
Kleur	VVS: 777525090 NRF: 6311837 RSK: 8565071 EAN: 5708590355115 HMI: 124224 DB: 2084079 FDA: INN/D135865 Antracietgrijs
Beschrijving	 VALUE IV opklapbare douchezitting en rugleuning verzorgen een eenvoudige oplossing voor gebruikers die moeten gaan zitten tijdens het douchen. VALUE IV rugsteun. Vaste montage. Materialen: gegoten aluminium en vacuüm-gegoten polyethyleen (PE). Inclusief bevestigingsbouten voor bakstenen muur. De pluggen zijn afhankelijk van het wandtype en moeten apart besteld worden.
Verstelbaarheid	Vaste montage
Materialen	Het wandprofiel is gemaakt van gegoten aluminium en de rugleuning is gemaakt van vacuüm-gegoten polyethyleen (PE)
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum.

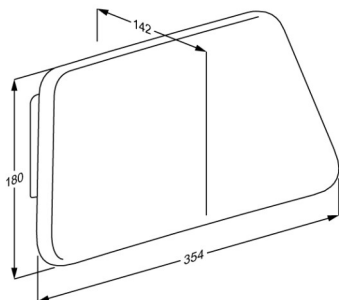

Product	VALUE IV rugsteun, vaste montage
Artikelnummer	R1661000112
Reiniging	Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak. Desinfecteermiddelen op chloorbasis voor het desinfecteren van oppervlakken mogen worden gebruikt volgens de productspecificatie en veiligheidsmaatregelen voor deze producten. De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden. DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes Klorilli (Kiilto Clean) NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken anders kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.