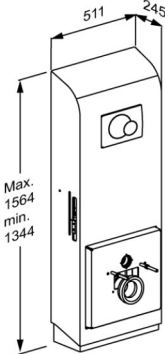




PRESSALIT®

Product Varunummer	SELECT TL5 elektrisk upphängning till toalett med tiltfunktion, till golvvavlopp R9211000
Färg	Vit
Beskrivning	VVS:617989800 NRF:1617111 EAN:5708590390956 FDA:IKX/D319729  SELECT elektrisk upphängning till toalett finns i flera modeller och färger för både väggavlopp och golvvavlopp. De finns i elektriskt eller manuellt höjdjusterbara versioner, med eller utan sidoprofiler och för standardtoalettskålar och duschtoaletter. Allt utvecklat med fokus på hygien och enkel rengöring. SELECT TL5 upphängning till toalett, till golvvavlop. Inkl. cistern med dubbelspolning 3/6 L (kan ställas om till 2/4 liter). Eldriven höjdjusterbar 220 mm med kontrollpanel på toalettarmstöd. Tiltfunktionen är begränsad till höjdjusteringen. Det innebär att toalettstolens fästplatta lutar när den lyfts till övre läge och återställs när enheten sänks. Den maximala lutningen är 8 grader. Toalettskål, toalettsits och toalettarmstöd (nödvändigt för höjdjusteringen) måste köpas separat. Exkl. monteringskrav för vägg.
Justerbar	Höjdregerbar
Höjdjustering	220 mm
Produktkapacitet	Max brukarvikt. 150 kg (MUM). Max belastning. 235 kg (brukarvikt + tillbehör) När toalettlyftare belastas med 235 kg, belastas varje fästskruv med 65 kg. <i>Toalettlyftaren testas statiskt med 587,5 kg, där toaletten fäster. Detta är i enlighet med kraven i gällande standarder hjälpmedlet. Observera att de flesta toaletter som kan monteras på lyftenheter, har testats till 400 kg.</i>
Uppåtgående hastighet	Hastighet upp: 7 mm/s Hastighet ner: 7 mm/s
Ljudnivå	50 dB
Material	Toalettlyftaren är tillverkad av rostfritt stål, med monteringskåpa i PMMA/ABS.



PRESSALIT®

Product Varunummer	SELECT TL5 elektrisk upphängning till toalett med tiltfunktion, till golvvavlopp R9211000
Funktioner Anslutnings ström (V) Motor Kontrollbox Strömförbrukning (max.belastning)	• Tiltfunktion • Elektrisk höjddreglerbar • Kontrollpanel på stödarm • Dubbelt spolsystem 230 LA40 CA63 Strömförbrukning vid maximal belastning: 420 W Strömförbrukning vid standby: 0,5 W
Garanti Rengöring	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum. Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. För rengöring av ytan kan klorinbaserade desinficeringsmedel användas enligt produktspecifikationen och säkerhetsföreskrifterna för de här produkterna. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättspnit 70% INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.



PRESSALIT®

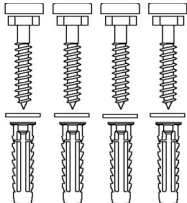
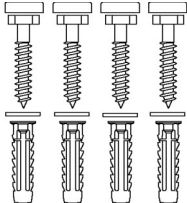
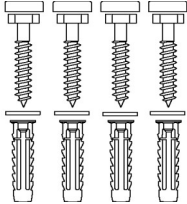
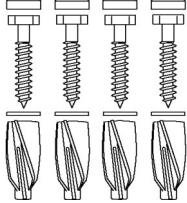
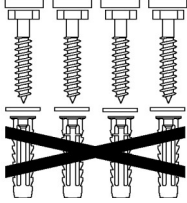
Product	SELECT TL5 elektrisk upphängning till toalett med tiltfunktion, till golvavlopp
Varunummer	R9211000
WEEE	Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektroniskrot i enlighet med WEEE-direktivet.



PRESSALIT®

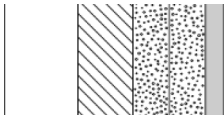
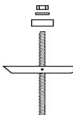
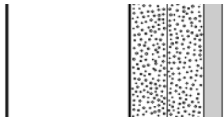
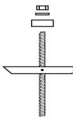
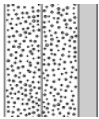
Product	SELECT TL5 elektrisk upphängning till toalett med tiltfunktion, till golvvavlopp
Varunummer	R9211000

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= Hlz12 V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8655 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med vita täckknappar. Använd inte plugg. Måste beställas separat.	



PRESSALIT®

Product Varunummer	SELECT TL5 elektrisk upphängning till toalett med tiltfunktion, till golvavlopp R9211000	
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.	  
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.	  
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår.	

pressalit.com