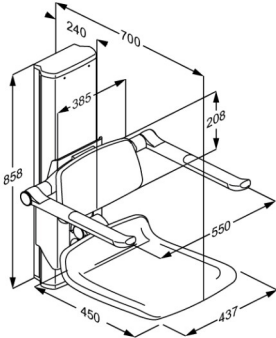




PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS duschsits 450, elektrisk höjdreglerbar R7634000
Färg	Vit
Beskrivning	VVS: 777517000 NRF: 6317145 EAN: 5708590360126 HMI: 124323  PLUS duschstolar erbjuds i flera färger. De finns både som fasta, elektriskt justerbara och manuellt justerbara, med och utan hål, och med möjlighet till rygg och armstöd. De är lämpliga för väggmontering eller för montering på Pressalit PLUS väggskenor. PLUS duschsits 450, uppfällbart, med rygg- och armstöd. Höjdreglerbart 500 mm, eldriven med manöverdosa. Uppfällbara armstöd kan höjdregleras oberoende av sits och ryggstöd. Material: Mjuk och skön PUR-skum med tråkärna, monterade på aluminiumprofil. Armstöd med greppfast tvåkomponentsplast är tålig och lätt att rengöra. Exkl. monteringskrav för vägg. <i>Ersätter R7470</i>
Justerbar Höjdjustering Produktkapacitet	Höjdreglerbar 500 mm Max brukarvikt (sits): 150 kg Max belastning armstöd: 55 kg När duschsitsen belastas med 150 kg, belastas varje fästskruv med 61 kg. <i>PLUS duschsitsar testas statiskt med säkerhetsfaktor 2,5. Detta är i enlighet med kraven i gällande standarder hjälpmålet.</i>
Uppåtgående hastighet Ljudnivå	Hastighet upp: 10 mm/s Hastighet ner: 10 mm/s 48 dB
Material	Duschsätet är framställt i anodiserad aluminium och polyuretanskum som är gjutet runt en plywoodkärna och gjuten med en yta av klar PU-lack. Ändarna på ryggstödet och sätet är förseglade med ändpluggar i ABS.



PRESSALIT®

Product	PLUS duschsits 450, elektrisk höjdglerbar
Varunummer	R7634000
Ergonomi	Ergonomisk sits - säte 450 x 437 mm.. Sitsen är utförd i ett mjukt och halkfritt material som aldrig känns kallt samtidigt som det ger en god sittkomfort. Armstödens ovala form gör dem lätta och bekväma att hålla, och ger bra stöd.
Funktioner	Både sits och armstöd kan fällas upp mot väggen efter användning. Sits, rygg- och armstöd kan justeras parallellt via ett enkelt och säkert klicksystem. Armstöden kan dessutom höjdgleras oberoende av sits och ryggstöd. Med elektrisk manövrering är det möjligt för vårdgiveren att ställa in sitsen till en bra arbetshöjd medan brukaren sitter på sitsen.
Anslutnings ström (V)	230
Motor	LA40 (Linak) 6000N, IPX6
Kontrollbox	SMPS14 (Linak) IPX6
Manöverdosa	HB3 (Linak) IP66
Strömförbrukning (max.belastning)	Strömförbrukning vid maximal belastning: 60 W Strömförbrukning vid standby: 0,5 W
Garanti	Pressalit förpliktat sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.



PRESSALIT®

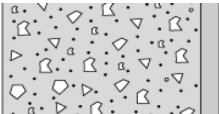
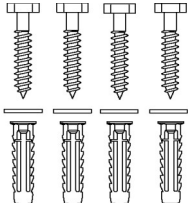
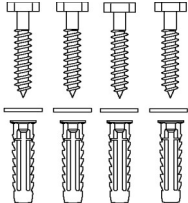
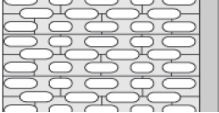
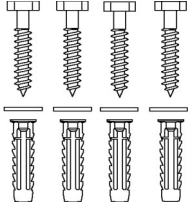
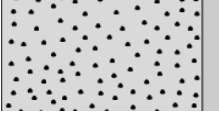
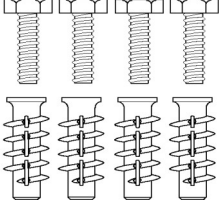
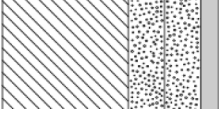
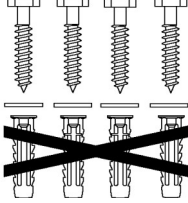
Product	PLUS duschsits 450, elektrisk höjdglerbar
Varunummer	R7634000
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:Erisan OXY+ Tvättsprit 70% CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH) INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa) Viktigt: PUR-ytor på PLUS duschsitsar och PLUS ryggstöd innehåller en antibakteriell beläggning som kan skadas om den används av annat än såpa och vatten för rengöring. Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.



PRESSALIT®

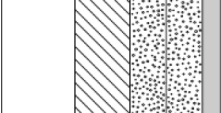
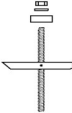
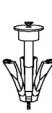
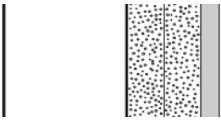
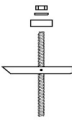
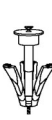
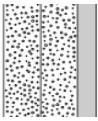
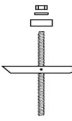
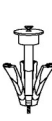
Product	PLUS duschsits 450, elektrisk höjdreglerbar
Varunummer	R7634000

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8603 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8603 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= H1z12 V8603 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8653 - Monteringsset, 4 st. bultar M8 x 35, plugg FTP M 8. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8603 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Använd inte plugg. Måste beställas separat.	



PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS duschsits 450, elektrisk höjdreglerbar R7634000		
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		 
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		 
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		 

pressalit.com