




<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	VALUE IV bruseklapsæde med støtteben, fastmonteret R1622000112
<b>Farve</b>	VVS: 777525412 NRF: 6314098 RSK: 8162782 EAN: 5708590377728 HMI: 124486 Antracitgrå
<b>Produktbeskrivelse</b>	 <p>VALUE IV bruseklapsæde og ryglæn er den enkle løsning for brugere der har behov for at kunne sidde ned mens de tager brusebad.</p> <p>VALUE IV brusesæde. Fast højde. Sædet er opklappeligt. Materialer: Trykstøbt aluminium, Rilsan-belagt rustfrit stål og vakuumformet polyethylen (PE). Inkl. monteringsbolte til massiv mur. Plugs afhænger af vægtype, og skal bestilles separat.</p>
<b>Justerbarhed</b> <b>Produktkapacitet</b>	Fastmonteret Maksimal brugervægt: 135 kg. Når sædet belastes med 135 kg, belastes hver monteringskrue med 125 kg. <i>VALUE brusesæder er testet statisk med en sikkerhedsfaktor på 1,5 i henhold til de anvendte hjælpemiddelstandarder.</i>
<b>Materialer</b> <b>Ergonomi</b> <b>Funktioner</b>	Vægbeslaget er fremstillet i trykstøbt aluminium, rammen og støttebenet i Rilsan-belagt, rustfrit stål. Rilsan-belægningen giver god beskyttelse mod rust, er behagelig at røre ved og let at rengøre. Sædet er fremstillet i vakuumformet polyethylen (PE). Bruseklapsædet er designet til montering i bruseområdet og kan nemt klappes op og ned efter behov. Ergonomisk udformet sæde med en behagelig overflade. Bruseklapsædet kan slås op, når det ikke er i brug - eller for at give plads. Sæde og ryg kan let afmonteres ved rengøring. Bruseklapsædet er udformet, så vandet kan løbe af.
<b>Garanti</b>	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



<b>Produkt</b>	VALUE IV bruseklapsæde med støtteben, fastmonteret
<b>Varenummer</b>	R1622000112
<b>Rengøring</b>	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Klorbaserede desinfektionsmidler kan bruges til desinfektion af overflader i henhold til produktspecifikationen og sikkerhedsforanstaltninger for disse produkter.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p><b>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70% WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes Klorilli (Kiilto Clean)</p> <p><b>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p>
<b>Overensstemmelses- erklæring</b>	Dette produkt er fremstillet i henhold til relevante krav i rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr.

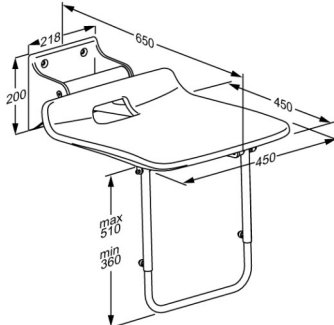

PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	VALUE IV bruseklapsæde med støtteben, fastmonteret
<b>Varenummer</b>	R1622000112

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®