




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	VALUE vaskophæng, manuelt højderegulérbart med gascylinder R1210000
Farve	VVS:654011300 NRF:6191663 EAN:5708590176710 HMI: 25575 NBS:N13:30,335 FDA:ILW/D142473 Hvid
Produktbeskrivelse	 VALUE vaskophæng, vægmonteret. Manuelt højderegulérbart 315 mm, med gasdrevet betjeningsgreb. Anbefales med til- og afløbssystem R2065/R2067. Inkl. monteringsbolte til håndvask. Inkl. monteringsbolte til massiv mur. Plugs afhænger af vægtype og skal bestilles separat. VALUE vaskophæng, vægmonteret. Manuelt højderegulérbart 315 mm, med gasdrevet betjeningsgreb. Anbefales med til- og afløbssystem R2065/R2067. Inkl. monteringsbolte til håndvask. Materialer: Rilsan-belagt stål. Inkl. monteringsbolte til massiv mur. Plugs afhænger af vægtype og skal bestilles separat.
Justerbarhed	Højderegulérbar
Reguleringshøjde	315 mm
Produktkapacitet	Maksimal belastning: 80 kg. Passer til vaske der vejer op til 22 kg. Når vasken belastes med 80 kg, belastes hver vægmonterings skrue med 20 kg. <i>Vaskophæng skal kunne bære vaskens vægt, samt vægten af en person der støtter sig til vasken, eller bruger vasken til at trække sig op ved.</i> Hverken vask eller vaskophæng er personbærende, og de testmetoder der er foreskrevet for vaskophæng afspejler dette: ISO 17966 foreskriver at vaskophæng testes statisk, på vaskens forkant, med 75% af maksimal brugervægt, dvs at når maksimalbelastningen på et vaskophæng er 80 kg og vasken vejer 22 kg, så svarer det, iflg. ISO 17966, til at en bruger der vejer 77 kg støtter sig til vasken.

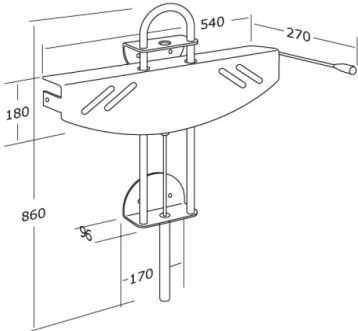

Produkt	VALUE vaskophæng, manuelt højderegulérbart med gascylinder
Varenummer	R1210000
Materialer	Basismateriale: Stål Overflademateriale: Rilsan
Ergonomi	Højderegulérbare vaskophæng er velegnede til fx plejehjem. Indstillingsmulighederne gør brugerne mere selvhjulpne og forbedrer hjælpernes arbejdsbetingelser.
Funktioner	Højderegulering med gas er særligt velegnet, når højden skal indstilles jævnlige til fx skiftende brugere.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Klorbaserede desinfektionsmidler kan bruges til desinfektion af overflader i henhold til produktspecifikationen og sikkerhedsforanstaltninger for disse produkter. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70% IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vasket hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.



PRESSALIT®

Produkt	VALUE vaskophæng, manuelt højderegulérbart med gascylinder
Varenummer	R1210000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®