




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	PLUS Klappsitz, manuell höhenverstellbar R5500112
Farbe	VVS:777531712 NRF:7501063 EAN:5708590328249 HMI: 130162 FDA:INN/D135865 Anthrazitgrau
Produkt- beschreibung	 <p>PLUS Klappsitz. Um 240 mm höhenverstellbar. Der Sitz ist hochklappbar. Zur Nachmontage auf senkrechter PLUS Wandschiene (nicht enthalten). Klappsitze sind für Verwendung in der Dusche nicht geeignet. Siehe Duschsitze statt.</p> <p>PLUS Klappsitz. Um 240 mm höhenverstellbar. Materialien: Aluminium mit einer 10µm Eloxalschicht, Duroplast und Kunststoff. Zur Nachmontage auf senkrechter Wandschiene (nicht enthalten).</p>
Verstellung Höhenverstellung	Höhenverstellbar 240 mm
Produktkapazität	Maximales Anwendergewicht: 265 kg. Bei einer Belastung der Klappsitz mit 265 kg, wird jede Montageschraube folglich mit bis zu 23 kg belastet.
Garantie	<i>PLUS Klappsitze wurden statisch mit einem Sicherheitsfaktor 1,5 getestet. Dies entspricht den Anforderungen der geltenden Normen.</i> Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.

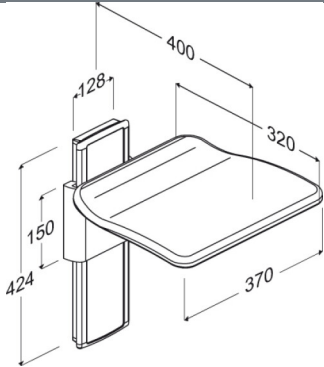

Produkt	PLUS Klappsitz, manuell höhenverstellbar
Produktnummer	R5500112
Reinigung	<p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70%</p> <p>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p> <p>ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE: Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.</p>



PRESSALIT®

Produkt	PLUS Klappsitz, manuellt höjningsjusterbart
Produktnummer	R5500112

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®