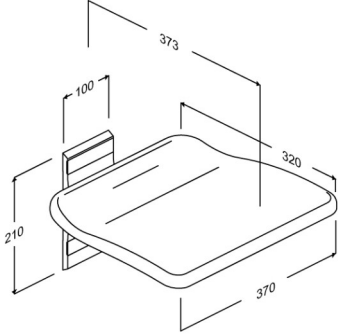




<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	PLUS uppfällbar sits, fast höjd R5510000
<b>Färg</b>	VVS:777531000 NRF:7501001 RSK:7973939 EAN:5708590306339 HMI: 130159 NBS:N13:448 FDA:INN/D135865 Vit
<b>Beskrivning</b>	 <p>Den uppfällbara sitsen är perfekt när det finns behov för extra sittplats och i minimala utrymmen. Dessa förekommer vanligtvis i rum där det ofta finns behov av att vila sig - t.ex. i köket, hissen, korridoren eller på- och avklädning i badrummet. Klappsits bör inte användas direkt i duschen.</p> <p>PLUS uppfällbar sits, fast höjd. Material: Aluminium, hårdplast, plastmaterial. Exkl. monteringskruv för vägg.</p>
<b>Justerbar</b> <b>Produktkapacitet</b>	Fast höjd Max brukarvikt: 435 kg När sitsan belastas med 435 kg, belastas varje fästskruv med 199 kg. <i>PLUS uppfällbara sitsar testas statiskt med säkerhetsfaktor 1,5. Detta är i enlighet med kraven i gällande standarder hjälpmedlet.</i>
<b>Material</b>	Material: Aluminium, hårdplast, plastmaterial.
<b>Garanti</b>	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.



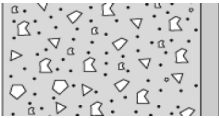
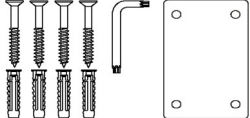

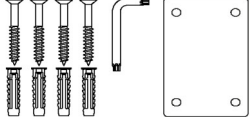
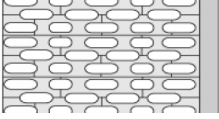
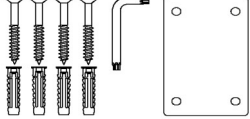
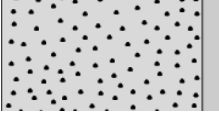
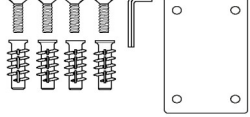
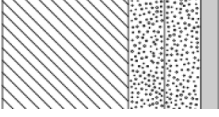
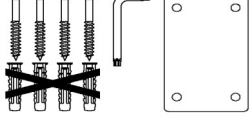
# PRESSALIT®

<b>Product</b>	PLUS uppfällbar sits, fast höjd
<b>Varunummer</b>	R5510000
<b>Rengöring</b>	<p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p><b>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättspit 70%</p> <p><b>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p>

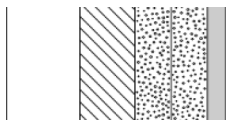
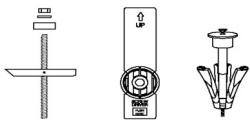
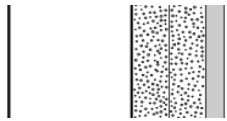
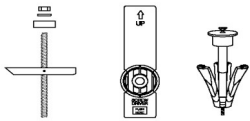
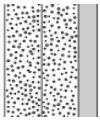


<b>Product</b>	PLUS uppfällbar sits, fast höjd
<b>Varunummer</b>	R5510000

## Montage i olika väggtyper

	<b>Betong &gt;B25</b> V8604 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø8 x 70 försänkt, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	<b>Mursten &gt;= Mz12</b> V8604 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø8 x 70 försänkt, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	<b>Cementsten &gt;= Hlz12</b> V8604 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø8 x 70 försänkt, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	<b>Lättbetong P4</b> V8654 - Monteringsset, 4 st. bultar M8 x 35 försänkt, plugg FTP M 8. Måste beställas separat.	
	<b>Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä</b> V8604 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø8 x 70 försänkt, plugg SX10. Använd inte plugg. Måste beställas separat.	



<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	PLUS uppfällbar sits, fast höjd R5510000
	<b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfänér</b> Monteringskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	<b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm</b> Monteringskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	<b>Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2</b> Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår. 