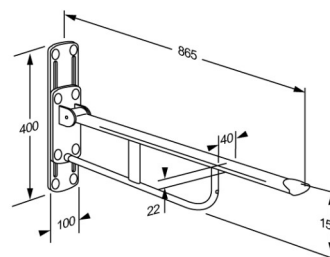




PRESSALIT®

Produkt	VALUE Stützklappgriff, höhenverstellbar
Produktnummer	R1110000
Farbe	<p> VVS:615722405 NRF:6191643 RSK:7972412 EAN:5708590176420 HMI: 25413 NBS:N13:436 FDA:ILS/D135866 Weiß </p>
Produkt- beschreibung	<p> VALUE Stützklappgriff, Wandmontage, hochklappbar, um 150 mm höhenverstellbar, Ausladung 865 mm. Das ergonomische Design sorgt für einen festen und angenehmen Halt sowie ein gutes Gefühl davon, wo die Stütze endet. Inkl. Befestigungsschrauben für massives Mauerwerk. Dübeln müssen separat bestellt werden. </p> <p> VALUE Stützklappgriff, Wandmontage, hochklappbar, um 150 mm höhenverstellbar, Ausladung 865 mm. Das ergonomische Design sorgt für einen festen und angenehmen Halt sowie ein gutes Gefühl davon, wo die Stütze endet. Materialien: Rilsan-beschichteter Stahl, druckgegossenes Aluminium, Kunststoff. Inkl. Befestigungsschrauben für massives Mauerwerk. Dübeln müssen separat bestellt werden. </p>
Verstellung	Höhenverstellbar
Höhenverstellung	150 mm
Produktkapazität	<p> Maximale Belastung: 120 kg. Bei einer Belastung der Stützklappgriff mit 120 kg, wird jede Montageschraube folglich mit bis zu 86 kg belastet. </p>
Materialien	<p>Hauptmaterial: Stahl</p> <p>Oberfläche: Rilsan</p> <p>Endkappen: Nylon (PA)</p>





PRESSALIT®

Produkt	VALUE Stützklappgriff, höhenverstellbar
Produktnummer	R1110000
Ergonomie	<p>Die Griffe bieten eine gute Hilfe beim Hinsetzen, Sitzen, Aufstehen und Stehen.</p> <p>Gute breite Stützflächen für Hände und Arme sowie die abgerundete Form geben einen sicheren Halt.</p>
Funktionen	<p>Der Stützklappgriff kann hochgeklappt werden, um Platz zu schaffen.</p> <p>Höhenverstellbar um 135 mm.</p>
Garantie	<p>Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.</p>



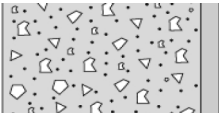
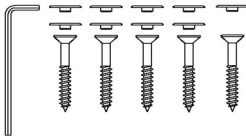

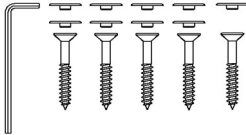
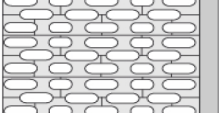
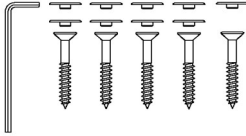
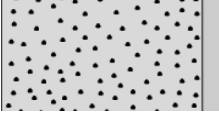
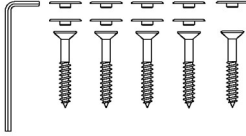
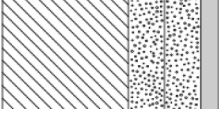
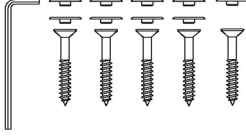
Produkt	VALUE Stützklappgriff, höhenverstellbar
Produktnummer	R1110000
Reinigung	<p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Zur Desinfektion der Oberflächen können chlorbasierte Desinfektionsmittel verwendet werden. Beachten Sie dabei die Produktspezifikationen und Sicherheitshinweise des Produkts.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes Klorilli (Kiilto Clean)</p> <p>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p>



PRESSALIT®

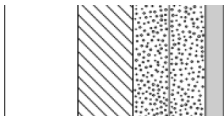
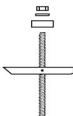

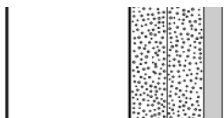
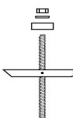

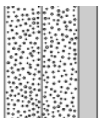

Produkt	VALUE Stützklappgriff, höhenverstellbar
Produktnummer	R1110000

Montage in verschiedenen Wandtypen

	Beton >B25 V8592 - 5 Stck. Senkkopfschrauben Ø10 x 80 , mit weisse Abdeckung ist beigefügt. Dübeln müssen separat bestellt werden.	
	Vollziegel >= Mz12 V8592 - 5 Stck. Senkkopfschrauben Ø10 x 80 , mit weisse Abdeckung ist beigefügt. Dübeln müssen separat bestellt werden.	
	Kalklochsandstein >= Hlz12 V8592 - 5 Stck. Senkkopfschrauben Ø10 x 80 , mit weisse Abdeckung ist beigefügt. Dübeln müssen separat bestellt werden.	
	Porenbeton P4 V8592 - 5 Stck. Senkkopfschrauben Ø10 x 80 , mit weisse Abdeckung ist beigefügt. Dübeln müssen separat bestellt werden.	
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung V8592 - 5 Stck. Senkkopfschrauben Ø10 x 80 , mit weisse Abdeckung ist beigefügt. Dübeln müssen separat bestellt werden.	



PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	VALUE Stützklappgriff, höhenverstellbar R1110000		
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten Befestigungsmaterial (5 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.		
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm Befestigungsmaterial (5 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.		
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht.		

Das ist die Verantwortung des Installateurs zu sichern, dass korrektes Befestigungsmaterial verwendet wird.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®