




# PRESSALIT®

<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	VALUE II toiletstøtte, 850 mm, med betjeningspanel R1183000
<b>Farve</b>	VVS:615892300 NRF:6191061 EAN:5708590373034 HMI: 138210 FDA: ILS/D135866 Hvid
<b>Produktbeskrivelse</b>	 <p>VALUE og VALUE II toiletstøtter med ALBA-vinge-monteringsprofil er specielt designet til anvendelse sammen med SELECT TL3 og TL4 toiletløftere. Højderegulering af den elektriske toiletløfter foretages ved hjælp af betjeningspanel som medfølger toiletstøtten.</p> <p>VALUE II toiletstøtte, inkl. betjeningspanel til TL3/TL4 toiletløfter, 850 mm, opklappelig, højderegulérbar 150 mm uden brug af værktøj (venstrehåndsbetjent). En god hjælp, når man sidder, står, eller skal forflytte sig ved toilettet. Materialer: Rilsan-belagt stål og trykstøbt aluminium. Til eftermontering på TL3/TL4 elektrisk toiletløfter, ALBA-vinge-monteringsprofil medfølger. Monteres til højre for bruger.</p>
<b>Justerbarhed</b> <b>Reguleringshøjde</b>	Højderegulérbar 150 mm
<b>Produktkapacitet</b>	Maksimal belastning: 120 kg.
<b>Materialer</b>	Toiletstøtten er fremstillet af rustfrit stål med en Rilsan-belagt overflade, som er behagelig at røre ved, let at rengøre, og som giver god beskyttelse mod rust. Monteringsprofilerne er fremstillet af trykstøbt aluminium.
<b>Garanti</b>	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.

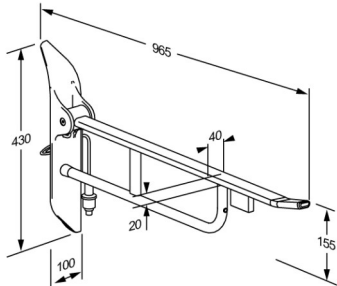

<b>Produkt</b>	VALUE II toiletstøtte, 850 mm, med betjeningspanel
<b>Varenummer</b>	R1183000
<b>Rengøring</b>	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Klorbaserede desinfektionsmidler kan bruges til desinfektion af overflader i henhold til produktspecifikationen og sikkerhedsforanstaltninger for disse produkter.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p><b>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70% WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes Klorilli (Kilto Clean)</p> <p><b>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p>
<b>WEEE</b>	Kontakt Pressalit eller Pressalits distributør som vil sørge for, at elektrisk affald bortskaffes i henhold til WEEE-direktivet.



# PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	VALUE II toiletstøtte, 850 mm, med betjeningspanel
<b>Varenummer</b>	R1183000

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®

12. juni 2026