




Produkt Varenummer	PLUS brusesæde 450 med hul, manuelt højderegulerbart R7125112
Farve	Antracitgrå
Produktbeskrivelse	<p>VVS: 777514612 NRF: 6317075 EAN: 5708590359137 FDA: INN/D135865</p>  <p>PLUS brusesæder tilbydes i flere farver. De fås både som fastmonterede, elektrisk regulerbare og manuelt regulerbare, med og uden hul, samt med tilvalg af ryg- og armlæn.</p> <p>De er velegnede til vægmontering eller til montering på Pressalit PLUS vægskinner.</p> <p>PLUS brusesæde 450 med hul, med ryglæn. Manuelt højderegulerbart 380 mm, uden brug af værktøj. Sædet er opklappeligt.</p> <p>Materialer: Blødt og komfortabelt PUR-skum med trækerne, monteret på aluminiumprofil.</p> <p>Til eftermontering på lodret PLUS vægskinne (medfølger ikke). <i>Erstatter R7412</i></p>
Justerbarhed Reguleringshøjde Produktkapacitet	<p>Højderegulerbar 380 mm</p> <p>Maksimal brugervægt: 200 kg. Når sædet belastes med 200 kg, belastes hver monteringskrue med 24 kg.</p> <p><i>PLUS brusesæder er testet statisk med en sikkerhedsfaktor på 1,5 i henhold til de anvendte hjælpemiddelstandarder.</i></p>
Materialer Ergonomi	<p>Brusesædet er hovedsagelig fremstillet af aluminium anodiseret 10 my.</p> <p>Sædet består af polyurethanskum der er støbt omkring en kerne af krydsfinér, og omstøbt med en overflade af klar PU-lak.</p> <p>Afslutningerne på ryglæn og sæde er forseglet med endepropper i ABS.</p> <p>Ergonomisk designet sæde - siddeflade 450 x 437 mm.</p> <p>Sædet er lavet af et blødt og skridsikkert materiale, der aldrig føles koldt, samtidig med at det giver en god siddekomfort.</p>



Produkt	PLUS brusesæde 450 med hul, manuelt højderegulérbart
Varenummer	R7125112
Funktioner	Sædet kan klappes op, når det ikke er i brug.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.
Rengøring	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Erisan OXY+ Tvættsprit 70% CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH)</p> <p>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa)</p> <p>Vigtigt: PUR-overflader på PLUS brusesæder og PLUS ryglæn indeholder en anti-bakteriel coating, som kan blive ødelagt såfremt der anvendes andet end vand og sæbe til rengøring.</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> <p>AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.</p>

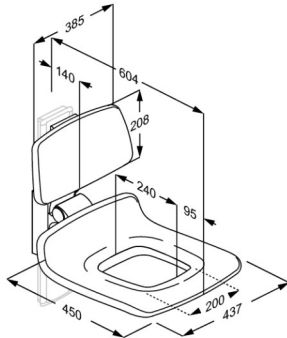

PRESSALIT®

Produkt	PLUS brusesæde 450 med hul, manuelt højderegulérbart
Varenummer	R7125112

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®