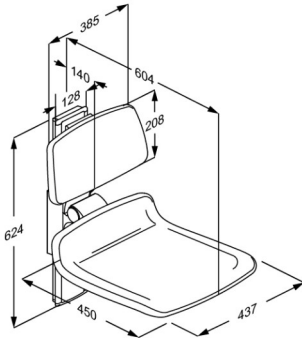




<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	PLUS douchezitting 450, handmatig in hoogte verstelbaar. R7424112
<b>Kleur</b>	VVS: 777515412 NRF: 6317117 EAN: 5708590359687 HMI: 124341 DB: 2510924 FDA: INN/D135865 Antracietgrijs
<b>Beschrijving</b>	 <p>Plus douchestoelen zijn leverbaar in tal van kleuren. Ze zijn leverbaar op een vaste hoogte dan wel elektrische of handmatig instelbaar. Beschikbaar met en zonder opening in de het zitgedeelte en optioneel te voorzien van een rugleuning of armsteunen. Ze kunnen worden toegepast direct op de muur of aan een PLUS wandrail.</p> <p>PLUS douchezitting 450 met rugleuning. Handmatig in hoogte 380 mm verstelbaar zonder het gebruik van gereedschap. De zitting is opklapbaar. Materialen: Comfortabel polyurethaan schuim over een kern van multiplex, gemonteerd op een aluminium profiel. Exclusief bevestigingsset. <i>Vervanger van R7420</i></p>
<b>Verstelbaarheid</b> <b>Afstelhoogte</b> <b>Product capaciteit</b>	In hoogte verstelbaar 380 mm Maximale gebruikers massa (zitting): 200 kg. Wanneer de zitting belast is met 200 kg, is elke wandbevestiging belast met 24 kg. <i>De zitting is statisch getest met veiligheidsfactor 1,5, wat een vereiste is volgens de toegepaste normen voor ondersteunende hulpmiddelen.</i>
<b>Materialen</b>	De douchezitting is gemaakt van polyurethaan (PU) schuim met een kern van multiplex en is bedekt met een voorgevormd oppervlak dat is beschermd met een heldere PU-lak. De rugleuning is gemaakt van polyurethaan (PU) schuim dat is beschermd met een heldere PU laklaag. Interne onderdelen en de bevestigingen zijn voornamelijk gemaakt van RVS. De scharniercilinder is afgedekt met ABS.

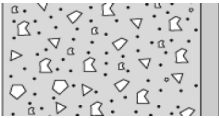
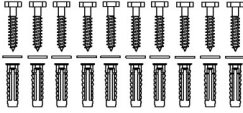

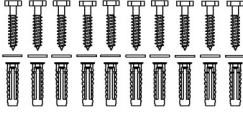
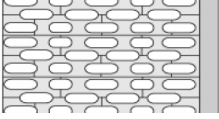
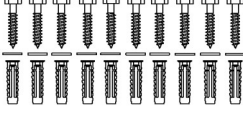
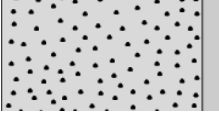
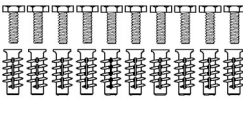
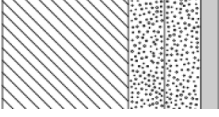
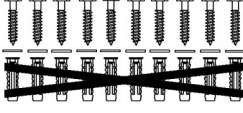


<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	PLUS douchezitting 450, handmatig in hoogte verstelbaar. R7424112
<b>Ergonomy</b> <b>Funktie</b>	Het ergonomisch zitoppervlak is 450 x 437 mm. Zacht en antislip materiaal dat warm aanvoelt. De zitting kan opgeklapt worden wanneer deze niet wordt gebruikt of om het vloeroppervlakte te maximaliseren. De zitting en rugleuning kunnen gelijktijdig in hoogte worden versteld dankzij een veilig en eenvoudig kliksysteem.
<b>Garantie</b> <b>Reiniging</b>	<p>Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum.</p> <p>Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiner. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen.</p> <p>De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden.</p> <p><b>DESINFECTEERMIDDELEN:</b> Erisan OXY+ Tvättsprit 70% CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH)</p> <p><b>NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN:</b> Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa)</p> <p>Belangrijk: Polyurethaanoppervlakken van PLUS-douchezittingen en PLUS-rugleuningen bevatten een antibacterieel oppervlak, dat wordt aangetast als het met iets anders dan water en zeep wordt gereinigd.</p> <p>Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken anders kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.</p> <p><b>ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN:</b> Pressalit raadt aan om kalkaanslag op de muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van 30% schoonmaakazijn en 70 % leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn schoon gemaakt, moeten de onderdelen worden afgeveegd met met schoon water bevochtigde uitgewrongen doek.</p>

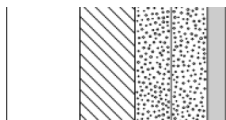
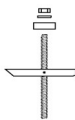

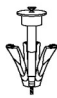
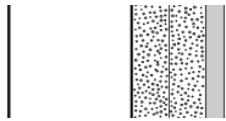
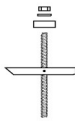

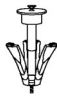
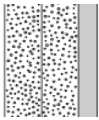


<b>Product</b>	PLUS douchezitting 450, handmatig in hoogte verstelbaar.
<b>Artikelnummer</b>	R7424112

## Installatie in verschillende wandtypes

	<b>Betonwanden &gt;B25</b> V8612 - Bevestigingsmateriaal, 10 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Gemetselde wanden &gt;= Mz12</b> V8612 - Bevestigingsmateriaal, 10 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Kalksteen&gt;=Hiz12</b> V8612 - Bevestigingsmateriaal, 10 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Gasbeton P4</b> V8662 - Bevestigingsmateriaal, 10 bouten M8 x 35, pluggen FTP M 8. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout</b> V8612 - Bevestigingsmateriaal, 10 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	



<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	PLUS douchezitting 450, handmatig in hoogte verstelbaar. R7424112			
	<b>Gipsplaten, watervast, versterkt met hout</b> Muurbevestigingen (10 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.			
	<b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal</b> Muurbevestigingen (10 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.			
	<b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast</b> Muurbevestigingen (10 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.	