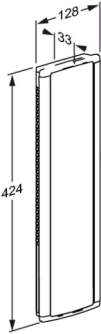




PRESSALIT®

Article Numéro article	PLUS glissière-support, 400 mm, crantée à gauche, pour montage vertical R9873112
Couleur	Gris anthracite
Description	<p>VVS:615843134 NRF:7501072 EAN:5708590369280 HMI: 124111</p>  <p>Veillez trouver ci-dessous une sélection des produits qui peuvent être montés sur la glissière-support.</p> <p>PLUS glissière-support, 400 mm, crantée à gauche, pour montage vertical. Pour les barres de relèvement réglables en hauteur de la main gauche. La plaque façade cache les vis de montage et les câbles et facilite le nettoyage. Matériaux : Aluminium et polystyrène. Livré sans vis de montage.</p>
Réglage	Montage fixe
Matériaux	La glissière-support est principalement composée d'aluminium anodisé 10 microns, la plaque frontale est faite de polystyrène. Les extrémités sont recouvert d'une pièce de finition en polymère ABS.
Ergonomie	La glissière-support verticale permet le réglage en hauteur de chaque produit de salle de bains.
Fonctions	La plaque frontale recouvre et protège les vis de montage et d'éventuels câbles.
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.



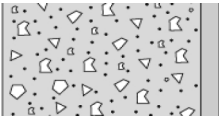
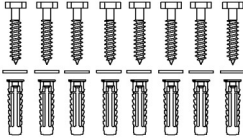

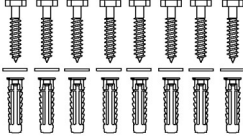
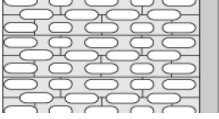
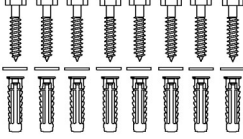
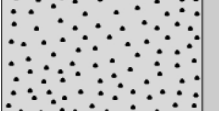
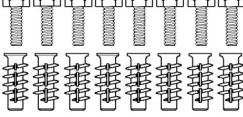
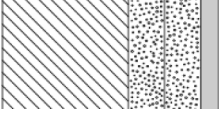
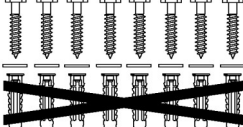
PRESSALIT®

<p>Article</p> <p>Numéro article</p>	<p>PLUS glissière-support, 400 mm, crantée à gauche, pour montage vertical</p> <p>R9873112</p>
<p>Nettoyage</p>	<p>Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface.</p> <p>Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage.</p> <p>NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Sufanios Premium</p> <p>Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.</p> <p>DÉTARTAGE DE L'ALUMINIUM : Pressalit recommande d'enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes de vinaigre pour 7 volumes d'eau et de sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.</p>
<p>Déclaration de conformité</p>	<p>Ce produit répond aux exigences pertinentes du Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux dans la classe de risque I. Ce produit est considéré comme un accessoire de dispositif médical, car sans être lui-même un dispositif médical, il est destiné à être utilisé avec plusieurs dispositifs médicaux donnés pour permettre une utilisation de ces derniers conforme à leur destination.</p>

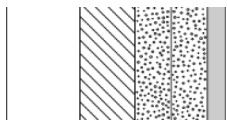
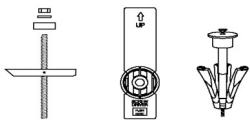
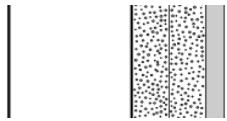
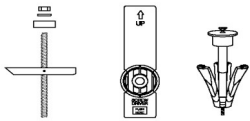
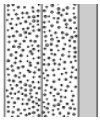



Article	PLUS glissière-support, 400 mm, crantée à gauche, pour montage vertical
Numéro article	R9873112

Installation dans de différents types de mur

	Béton >B25 V8610 - Kit vis de montage, 8 vis cervicales Ø8 x 70, chevilles SX10. Doit être commandé séparément.	
	Brique pleine >= Mz12 V8610 - Kit vis de montage, 8 vis cervicales Ø8 x 70, chevilles SX10. Doit être commandé séparément.	
	Parpaing plein >= Hlz12 V8610 - Kit vis de montage, 8 vis cervicales Ø8 x 70, chevilles SX10. Doit être commandé séparément.	
	Béton cellulaire P4 V8660 - Kit vis de montage, 8 boulons fraisés M8 x 35, chevilles FTP M 8. Doit être commandé séparément.	
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de bois V8610 - Kit vis de montage, 8 vis cervicales Ø8 x 70, chevilles SX10. N'utilisez pas les chevilles. Doit être commandé séparément.	



Article Numéro article	PLUS glissière-support, 400 mm, crantée à gauche, pour montage vertical R9873112	
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de contreplaqué 22 mm Vis de montage (8 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.	
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée d'acier 2 mm Vis de montage (8 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.	
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable Montage dans ce type de mur n'est pas recommandé - risque de blessure mortelle pour des personnes.	

C'est la responsabilité de l'installateur d'assurer l'usage des fixations murales appropriées.