




Produkt Varenummer	PLUS ryglæn til fastmontering R6304277
Farve	NRF:6317029 EAN:5708590365343 HMI: 124221 FDA:INN/D135865 Limegrøn
Produktbeskrivelse	 <p>PLUS ryglæn fås i flere farver og versioner, de fås både som fastmonterede og regulérbare. De er velegnede til brug bag et væghængt toilet uden cisterne eller til montering på en af Pressalits toiletløftere.</p> <p>PLUS ryglæn, 293 x 186 mm, polstret. Fast højde, til montering direkte på væg bag et væghængt toilet uden cisterne. Materialer: Aluminium og blødt purskum med trækerne. Inkl. monteringsbolte til massiv mur. Plugs afhænger af vægtype og skal bestilles separat.</p>
Justerbarhed Produktkapacitet	Fastmonteret Maksimal belastning: 50 kg. Maksimal brugervægt: 100 kg. Når ryglænet belastes med 50 kg, belastes hver vægmonterings skrue med 59 kg. <i>Ryglæn skal kunne bære vægten af en person der støtter sig til det.</i> Ryglæn er ikke personbærende , og de testmetoder der er foreskrevet for ryglæn afspejler dette: ISO 17966 foreskriver at ryglæn testes statisk med 50% af maksimal brugervægt, dvs at når maksimalbelastningen på et ryglæn er 50 kg, så svarer det, iflg. ISO 17966, til at en bruger der vejer 100 kg støtter sig til ryglænet.
Materialer Funktioner	Ryglænet er fremstillet i PUR-skum og er overtrukket med en klar overfladelak i PUR. Til toilet uden cisterne
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



Produkt	PLUS ryglæn til fastmontering
Varenummer	R6304277
Rengøring	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Erisan OXY+ Tvættsprit 70% CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH)</p> <p>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa)</p> <p>Vigtigt: PUR-overflader på PLUS brusesæder og PLUS ryglæn indeholder en anti-bakteriel coating, som kan blive ødelagt såfremt der anvendes andet end vand og sæbe til rengøring.</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> <p>AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.</p> <p>Forventet levetid: 10 år. Kontraindikationer for brug: Det anbefales ikke at personer, der har brug for at ligge ned ved toiletbesøg, forsøger at bruge ryglænet til at støtte sig ved.</p>

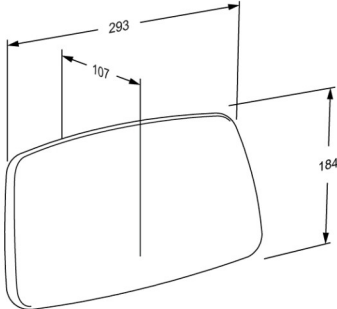

PRESSALIT®

Produkt	PLUS ryglæn til fastmontering
Varenummer	R6304277

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®