




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	PLUS Klappsitz, manuell höhenverstellbar R5500112
Farbe	VVS: 777531712 NRF: 7501063 EAN: 5708590328249 HMI: 130162 FDA: INN/D135865 Anthrazitgrau
Produkt- beschreibung	 PLUS Klappsitz. Um 240 mm höhenverstellbar. Der Sitz ist hochklappbar. Zur Nachmontage auf senkrechter PLUS Wandschiene (nicht enthalten). Klappsitze sind für Verwendung in der Dusche nicht geeignet. Siehe Duschsitze statt. PLUS Klappsitz. Um 240 mm höhenverstellbar. Materialien: Aluminium mit einer 10µm Eloxalschicht, Duroplast und Kunststoff. Zur Nachmontage auf senkrechter Wandschiene (nicht enthalten).
Verstellung Höhenverstellung Produktkapazität	Höhenverstellbar 240 mm Maximales Anwendergewicht: 265 kg. Bei einer Belastung der Klappsitz mit 265 kg, wird jede Montageschraube folglich mit bis zu 23 kg belastet. <i>PLUS Klappsitze wurden statisch mit einem Sicherheitsfaktor 1,5 getestet. Dies entspricht den Anforderungen der geltenden Normen.</i>
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.

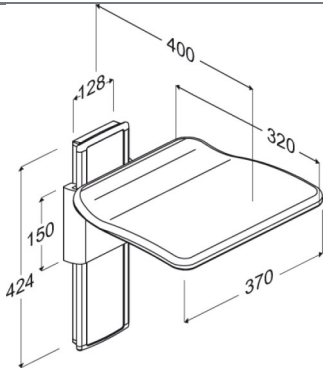

PRESSALIT®

Produkt	PLUS Klappsitz, manuell höhenverstellbar
Produktnummer	R5500112
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können. ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE: Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.



PRESSALIT®

Produkt	PLUS Klappsitz, manuell höhenverstellbar
Produktnummer	R5500112

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®