




<b>Produkt</b> <b>Produktnummer</b>	PLUS Vorderstütze, 450 - 520 mm RT873112
<b>Farbe</b>	VVS:777539012 NRF:7501041 EAN:5708590319360 HMI: 124198 NBS:N13:426 FDA:INN/D135865 Anthrazitgrau
<b>Produkt- beschreibung</b>	 <p>PLUS Vorderstütze sind in drei verschiedenen Längen erhältlich und können auch als Rückenstütze verwendet werden. Sie sind zwischen zwei PLUS Stützklappgriffen oder zwischen den Armlehnen eines PLUS Duschsitzes zu anbringen.</p> <p>PLUS Vorderstütze, 450 - 520 mm. Für PLUS Duschsitz 310 und PLUS Stützklappgriffe</p>
<b>Produktkapazität</b>	Maximale Belastbarkeit: 70 kg
<b>Materialien</b> <b>Ergonomie</b> <b>Funktionen</b>	Stahl und Kunststoff Stabilisiert und korrigiert den Benutzer mit gestörter Körperbalance. Menschen mit körperlichen Einschränkungen, insbesondere solche mit eingeschränkter Kraft und Stabilität des Oberkörpers, oder Menschen, die an Krampfanfällen oder unter unwillkürlichen Bewegungen leiden, besteht die Gefahr von der Toilette zu fallen. Im Gegensatz zu Gurten, die unangenehm zu tragen sind, da sie die Haut einklemmen können, werden unsere verstellbaren Vorder- und Rückenstützen direkt zwischen zwei PLUS Stützklappgriffe oder zwischen die Armlehnen eines Duschsitzes montiert. Dadurch werden die Benutzer sicher und bequem in Position gehalten und bieten somit eine sichere Unterstützung bei der Pflege und eine hohe Funktionalität.
<b>Garantie</b>	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.



<b>Produkt</b>	PLUS Vorderstütze, 450 - 520 mm
<b>Produktnummer</b>	RT873112
<b>Reinigung</b>	<p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p><b>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70%</p> <p><b>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p> <p><b>ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE:</b> Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.</p>

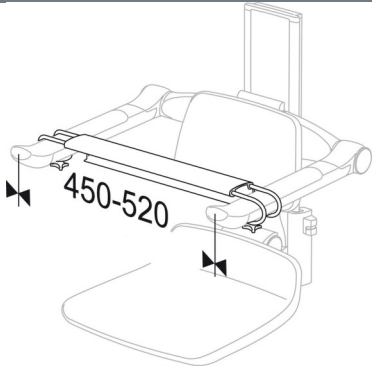

# PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	PLUS Vorderstütze, 450 - 520 mm
<b>Produktnummer</b>	RT873112

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®

23. juni 2026