




# PRESSALIT®

<b>Produkt</b> <b>Produktnummer</b>	VALUE Wandhalterung mit Montageplatte für Waschtisch, manuell höhenverstellbar R1214000
<b>Farbe</b>	VVS:654011410 NRF:6191676 EAN:5708590176499 HMI: 25578 NBS:N13:30,335 FDA:ILW/D142473 Weiß
<b>Produkt- beschreibung</b>	<div>  </div> <p>Wandhalterung für Waschbecken, mit Montageplatte, um 150 mm höhenverstellbar (Empfehlung Zu- und Ablaufsystem R2065/R2067) Inkl. Befestigungsmaterial für massives Mauerwerk</p> <p>Wandhalterung für Waschbecken, mit Montageplatte, um 150 mm höhenverstellbar (Empfehlung Zu- und Ablaufsystem R2065/R2067) Inkl. Befestigungsmaterial für massives Mauerwerk</p>
<b>Verstellung</b> <b>Höhenverstellung</b> <b>Produktkapazität</b>	Höhenverstellbar 150 mm <p>Maximale Belastbarkeit: 80 kg.          Geeignet für Waschtische von bis zu 22 kg.          Bei einer Belastung mit 80 kg, trägt jede Befestigungsschraube 22 kg.  <i>Die Waschtisch-Lifter müssen in der Lage sein, das Gewicht des Waschtisches und das Gewicht der Person zu tragen, die den Waschtisch benutzt, um sich aus der sitzenden Position aufzurichten. <b>Weder der Waschtisch noch der Waschtisch-Lifter sind zum Tragen einer Person bestimmt.</b> Eine für den Waschtisch-Lifter geltende Prüfmethode spiegelt dies wider: ISO 17966 schreibt eine statische Prüfung an der Vorderkante des Waschtisches bei 75% des maximalen Benutzergewichts vor, d.h. wenn die maximale Belastung eines Waschtisch-Lifters 80 kg und das Gewicht des Waschtisches 22 kg beträgt, entspricht dies nach ISO 17966 einem Benutzergewicht von 77 kg, das sich an der Vorderkante des Waschtisches abstützt.</i></p>
<b>Materialien</b>	Hauptmaterial: Stahl Oberfläche: Rilsan

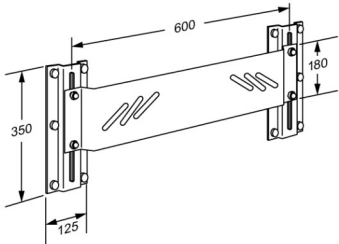

# PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	VALUE Wandhalterung mit Montageplatte für Waschtisch, manuell höhenverstellbar
<b>Produktnummer</b>	R1214000
<b>Funktionen</b>	Höhenverstellbar um 150 mm.
<b>Garantie</b>	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.
<b>Reinigung</b>	<p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Zur Desinfektion der Oberflächen können chlorbasierte Desinfektionsmittel verwendet werden. Beachten Sie dabei die Produktspezifikationen und Sicherheitshinweise des Produkts.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p><b>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70%</p> <p><b>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abgetrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p>



# PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	VALUE Wandhalterung mit Montageplatte für Waschtisch, manuell höhenverstellbar
<b>Produktnummer</b>	R1214000

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

## PRESSALIT®