




# PRESSALIT®

<b>Produkt</b> <b>Produktnummer</b>	PLUS Rückenlehne, seitlich verschiebbar R6414277
<b>Farbe</b>	NRF:6317048 EAN:5708590365497 HMI: 124208 FDA:INN/D135865  Limonengrün
<b>Produkt- beschreibung</b>	 <p>PLUS Rückenlehnen werden in verschiedenen Farben und Versionen angeboten. Sie sind sowohl in fester Höhe als auch verstellbar erhältlich. Sie eignen sich zur Wandmontage hinter einer Toilette ohne Spülkasten oder zur Montage an einem der Pressalit WC-Lifter SELECT.</p> <p>PLUS Rückenlehne, 385 x 209 mm, gepolstert. Seitlich verschiebbar, zur Montage auf waagerechter Wandschiene hinter einer Wand-WC ohne Spülkasten. Abnehmbar ohne Werkzeug und leicht wieder zu anbringen. Material: Aluminium und PUR-Schaumstoff mit einer in-mould-coating Oberflächenbeschichtung versehen und mit PUR-Klarlack geschützt. Zur Nachmontage auf waagerechter PLUS Wandschiene (nicht enthalten).</p>
<b>Verstellung</b> <b>Produktkapazität</b>	Seitlich verstellbar  Maximale Belastbarkeit: 50 kg. Maximales Benutzergewicht: 100 kg. Bei einer Belastung mit 50 kg, trägt jede Befestigungsschraube 33 kg. <i>Rückenlehnen müssen in der Lage sein, das Gewicht der Person zu tragen, die sich dagegen lehnt. <b>Die Rückenlehne soll nicht das gesamte Körpergewicht einer Person tragen.</b> Eine für die Rückenlehne geltende Prüfmethode spiegelt dies wider: ISO 17966 schreibt eine statische Prüfung bei 50% des maximalen Benutzergewichts vor, d.h. wenn die maximale Belastung eines Waschtisch-Lifters 50 kg beträgt, entspricht dies nach ISO 17966 einem Benutzergewicht von 100 kg, das sich an der Vorderkante des Waschtisches abstützt.</i>
<b>Materialien</b>  <b>Ergonomie</b>  <b>Funktionen</b>	Der Rückenlehne ist aus PUR-Schaumstoff hergestellt und ist mit einer Oberflächenbeschichtung versehen sowie mit PUR-Klarlack geschützt. Interne Komponenten und Halterungen sind vorwiegend in Edelstahl ausgeführt. Die Kanten der Rückenlehne sind mit Abdeckungen aus ABS-Polymer versiegelt.  Das weiche und rutschfeste Material fühlt sich nie kalt an.  Der Rückenlehne kan mit eingebautem Spülkasten verwendet werden.

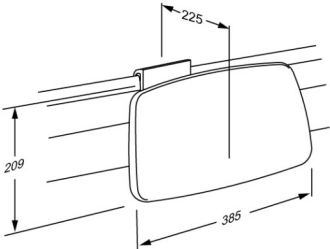

<b>Produkt</b>	PLUS Rückenlehne, seitlich verschiebbar
<b>Produktnummer</b>	R6414277
<b>Garantie</b>	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.
<b>Reinigung</b>	<p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p><b>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b> Erisan OXY+ Tvättsprit 70% CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH)</p> <p><b>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b> Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa) Wichtig: PUR-Oberflächen von PLUS Duschsitze und PLUS Rückenlehne erhalten ein anti-bakterielles Coating, das durch andere Reinigung als Wasser und Seife zerstört werden kann.</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abgetrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p> <p><b>ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE:</b> Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.</p>



# PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	PLUS Rückenlehne, seitlich verschiebbar
<b>Produktnummer</b>	R6414277

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

# PRESSALIT®