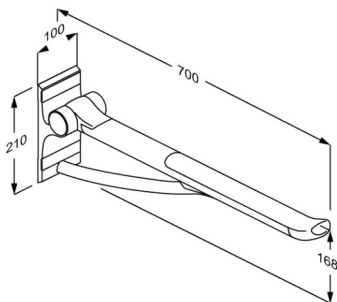




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	PLUS Stützklappgriff, 700 mm Ausladung R360070000
Farbe Produkt- beschreibung	<p> VVS:615871100 NRF:6191066 RSK:8487436 EAN:5708590367859 HMI: 123556 DB: 2509941 FDA:ILS/D135866 Weiß </p>  <p> Alle PLUS Stützklappgriffe sind mit einer integrierten Federbelastung ausgestattet, die eine kontrollierte Bewegung zwischen der waagerechten und senkrechten Position gewährleistet. Geeignet für WC's mit einer Ausladung von 540/550mm. <i>Ersetzt die Auslaufmodelle R3060, RF060, R3070 und RF070.</i> </p> <p> PLUS Stützklappgriff mit Federbelastung. Gesamtlänge 700 mm. Die Armlehne hat eine ovale form, und der Abschluss des Griffes stützt und bietet komfortablen Halt. Zur Festmontage. Hochklappbar. Materialien: Aluminium mit einer 10µm Eloxalschicht. Greiffläche aus weichem SEBS-Kunststoff mit glasfaserverstärktem Nylonkern. Exkl. Befestigungsmaterial. </p>
Verstellung Produktkapazität	<p> Festmontage </p> <p> Maximale Belastung: 150 kg. Wenn der Stützklappgriff mit 150 kg belastet ist, wird jeder Montageschraube mit 161 kg belastet. </p> <p> <i>PLUS Stützklappgriffe sind mit einem Gewicht von bzw. 700 kg (nahe an der Wand), 425 kg (in der Mitte) und 225 kg (an der äußersten Punkt) statisch getestet worden.</i> </p>
Materialien	<p> Der Stützklappgriff besteht vorwiegend aus Aluminium mit einer 10 µm Eloxalschicht und ist am Ende mit einer rutschfesten, griffigen Oberfläche aus weichem SEBS-Kunststoff mit glasfaserverstärktem Nylonkern versehen. Auch der Scharnierarm ist mit weichem SEBS-Kunststoff überzogen. Interne Komponenten und Halterungen sind vorwiegend in Edelstahl ausgeführt. Die Scharnierhülse ist mit Endkappen aus ABS versehen. </p>



Produkt	PLUS Stützklappgriff, 700 mm Ausladung
Produktnummer	R360070000
Ergonomie	<p>Eine weiche, rutschsichere Oberfläche, die sich angenehm anfühlt.</p> <p>Die ovale Form des Stützklappgriffes stützt und bietet einen guten, komfortablen Halt.</p> <p>Der Abschluss des Stützklappgriffes ist ein guter Halt, wenn man sich hinstezt bzw, autsteht. Zugleich erhält man ein gutes Gefühl dafür, wo der Stützklappgriff endet.</p>
Funktionen	<p>Der Stützklappgriff ist hochklappbar.</p> <p>An der Unterseite lässt sich verschiedenes Zubehör montieren.</p> <p>Der Stützklappgriff ist mit einem integrierten Dämpfer ausgestattet. Mit Hilfe davon lässt sich der Stützklappgriff in einer ruhigen, gleitenden Bewegung hoch- und runterklappen.</p>
Garantie	<p>Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.</p>



PRESSALIT®

Produkt	PLUS Stützklappgriff, 700 mm Ausladung
Produktnummer	R360070000
Reinigung	<p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Oxyplus-acid 2% (Diversey) WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes</p> <p>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abgetrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p> <p>ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE: Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.</p>



PRESSALIT[®]

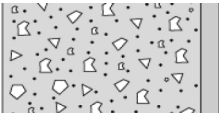
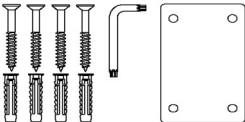

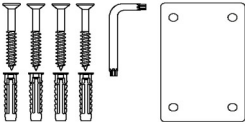
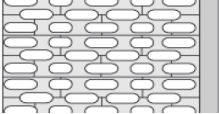
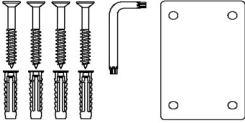
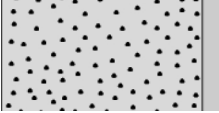
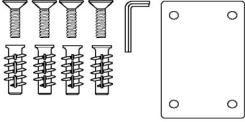
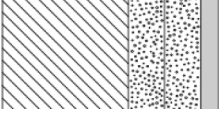
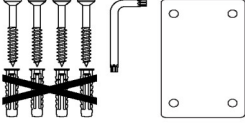
Produkt	PLUS Stützklappgriff, 700 mm Ausladung
Produktnummer	R360070000
	<p>Verwendungszweck Der Stützklappgriff bietet Personen, die sich beim WC-Besuch hinsetzen, aufstehen oder sich seitlich vom Rollstuhl umsetzen, sicheren Halt.</p> <p>Betriebsbedingungen Zum Gebrauch in Nassräumen wie Badezimmern oder Waschräumen, zuhause, in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern. Bei professioneller Verwendung beträgt die erwartete Lebensdauer 10 Jahre. <i>Die Lebensdauer wurde gemäß ISO 17966:2016 getestet.</i></p> <p>Für die Wartung beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisung, die dem Produkt beigelegt ist und die ebenfalls auf der Webseite unter „Downloads“ gefunden werden kann.</p>



PRESSALIT[®]

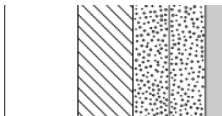
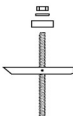

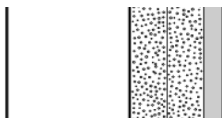
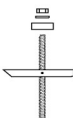

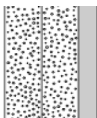

Produkt	PLUS Stützklappgriff, 700 mm Ausladung
Produktnummer	R360070000

Montage in verschiedenen Wandtypen

	Beton >B25 V8604 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Senkkopfschrauben Ø8 x 70, Dübeln SX10. Muss separat bestellt werden.	
	Vollziegel >= Mz12 V8604 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Senkkopfschrauben Ø8 x 70, Dübeln SX10. Muss separat bestellt werden.	
	Kalklochsandstein >= Hlz12 V8604 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Senkkopfschrauben Ø8 x 70, Dübeln SX10. Muss separat bestellt werden.	
	Porenbeton P4 V8654 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Senkkopfbolzen M8 x 35, Dübeln FTP M 8. Muss separat bestellt werden.	
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung V8604 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Senkkopfschrauben Ø8 x 70, Dübeln SX10. Bei Holz-Hinterfütterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel). Muss separat bestellt werden.	



PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	PLUS Stützklappgriff, 700 mm Ausladung R360070000		
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.		
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.		
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht.		

pressalit.com