




PRESSALIT®

Product Varunummer	VALUE IV duschsits, fast höjd R1620000112
Färg	VVS: 777525312 NRF: 6314097 RSK: 8565069 EAN: 5708590377711 HMI: 124483 DB: 2296038 FDA: INN/D135865 Antracitgrå
Beskrivning	 VALUE IV duschsits och ryggstöd är den enkla lösningen för användare som behöver kunna sitta ner medan de tar en dusch. VALUE IV duschsits. Fast höjd. Sits är uppfällbart. Material: Pressgjuten aluminium, Rilsan-belagt, rostfritt stål och vakuumformad polyeten (PE). Inkl. monteringsskruvar för massiv sten. Pluggs måste beställas separat.
Justerbar Produktkapacitet	Fast höjd Max brukarvikt: 135 kg. När duschsitsan belastas med 135 kg, belastas varje fästskruv med 125 kg. <i>VALUE duschsitsar testas statiskt med säkerhetsfaktor 1,5. Detta är i enlighet med kraven i gällande standarder hjälpmedlet.</i>
Material Ergonomi Funktioner	Väggbeslag är tillverkat i pressgjuten aluminium, ramen i Rilsan-belagt, rostfritt stål. Rilsan-beläggningen skyddar mot rost, är skön att röra vid och enkel att rengöra. Sitsen är tillverkat av vakuumformad polyeten (PE). Sätets halkskyddsmönster säkerställer att vattnet rinner av både i horisontellt och vertikalt läge. Sätet är lätt böjt mot mitten, vilket hjälper användaren att hålla sig mitt på sätet. Den hopfällbara duschsits är avsedd att monteras i duschutrymmet och kan enkelt fällas upp och ner efter behov. Sitsen och ryggstödet kan enkelt tas bort för rengöring.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.

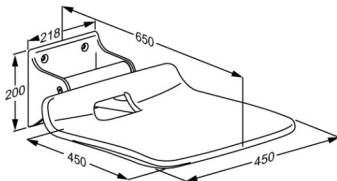

Product	VALUE IV duschsits, fast höjd
Varunummer	R1620000112
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. För rengöring av ytan kan klorinbaserade desinficeringsmedel användas enligt produktspecifikationen och säkerhetsföreskrifterna för de här produkterna. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättspnit 70% WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes Klorilli (Kiilto Clean) INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.