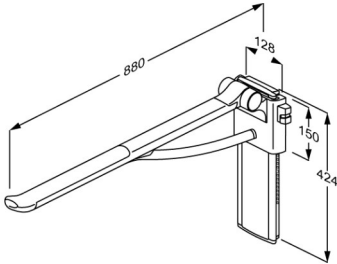




<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	PLUS toiletsteun, 850 mm, rechtshandige bediening R370485035
<b>Kleur</b>	NRF:6191096 EAN:5708590368238 HMI: 123500 FDA:ILS/D135866  Rood (RAL 3003) 
<b>Beschrijving</b>	<p>Alle PLUS toiletsteunen zijn voorzien van een geïntegreerd contragewicht, dat zorgt voor een gecontroleerde beweging tussen horizontale en verticale posities. Geschikt voor gebruik met closet welke een diepte vanaf de wand heeft van 700 mm, en voor staande toiletten.</p> <p>PLUS toiletsteun met veer. Totale lengte 880 mm, ergonomisch gevormd om een duidelijk einde aan de toiletsteun te geven. Rechtshandige bediening. In hoogte 240 mm verstelbaar zonder gebruik van gereedschap. Opklapbaar en afneembaar. Antraciete afdekplaat voor verticale wandrails.</p> <p>Materialen: de toiletsteunen zijn gemaakt van 10-micrometer geanodiseerd aluminium, met een antislip-grip oppervlak gemaakt van zachte SEBS met een met glasvezel versterkte nylon kern Exclusief montageset.</p>
<b>Verstelbaarheid</b> <b>Afstelhoogte</b> <b>Product capaciteit</b>	In hoogte verstelbaar 240 mm  Maximale belasting: 150 kg. Wanneer de toiletsteun belast is met 150 kg, wordt elke wandbevestiging in de verticale wandrail belast met 50 kg.  <i>PLUS toiletsteunen zijn statisch getest met 700 kg (dicht bij de muur), 425 kg (in het midden) en 225 kg (aan het uiteinde).</i>
<b>Materialen</b>	De toiletsteunen zijn voornamelijk gemaakt van geanodiseerd aluminium van 10 micrometer, met een antislip-grip oppervlak aan het einde van zachte SEBS en met een met glasvezel versterkte nylon kern. De toiletsteun is tevens gemaakt van zachte SEBS. Interne onderdelen en de bevestigingen zijn voornamelijk gemaakt van RVS. De scharniercilinder is afgedekt met ABS-polymeer.



PRESSALIT®

<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	PLUS toiletsteun, 850 mm, rechtshandige bediening R370485035
<b>Ergonomy</b>	<p>De ovale vorm geeft een eenvoudig en comfortabel oppervlak om tegen te leunen en duwen.</p> <p>Het uiteinde van de toiletsteun is gebogen zodat het eenvoudiger is om jezelf vanuit een zittende positie naar voren te trekken en geeft ook een duidelijk einde van de toiletsteun.</p> <p>Zacht en antislip materiaal dat warm aanvoelt.</p>
<b>Funktie</b>	<p>Opklapbaar tegen de muur.</p> <p>De onderzijde is gemaakt voor de montage van diverse accessoires b.v. closetrolhouder.</p>
<b>Garantie</b>	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum.



<b>Product</b>	PLUS toiletsteun, 850 mm, rechtshandige bediening
<b>Artikelnummer</b>	R370485035
<b>Reiniging</b>	<p>Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen.</p> <p>De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden.</p> <p><b>DESINFECTEERMIDDELEN:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Oxyplus-acid 2% (Diversey) WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes</p> <p><b>NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken anders kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.</p> <p><b>ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN:</b> Pressalit raadt aan om kalkaanslag op de muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van 30% schoonmaakazijn en 70 % leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn schoon gemaakt, moeten de onderdelen worden afgeveegd met met schoon water bevochtigde uitgewrongen doek.</p>



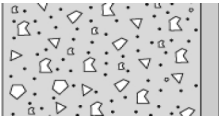
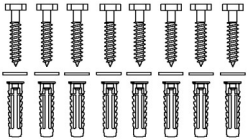

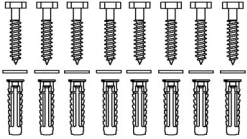
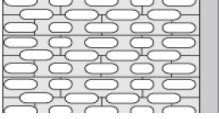
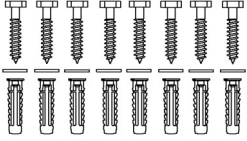
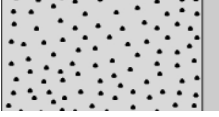
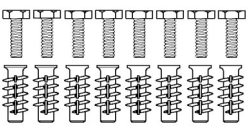
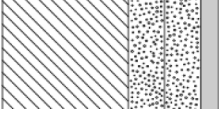
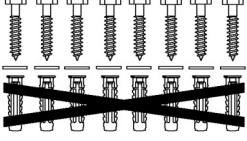
PRESSALIT®

<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	PLUS toiletsteun, 850 mm, rechtshandige bediening R370485035
	<p><b>Beoogd gebruik</b> De toiletsteun wordt gebruikt als ondersteuning voor het gaan zitten of opstaan van een toilet, of voor het zijwaarts verplaatsen vanuit een rolstoel.</p> <p><b>Operationele omgeving</b> Voor gebruik in een natte omgeving in huis, zoals een badkamer of een wasruimte in particuliere woningen, verpleeghuizen en ziekenhuizen. Voor institutioneel gebruik is de verwachte levensduur 10 jaar. <i>Levenscyclus test is uitgevoerd volgens ISO 17966:2016.</i></p> <p>Voor onderhoud raadpleeg de gebruikers handleiding, die bij het product is geleverd of via de website onder het kopje "Downloads".</p>

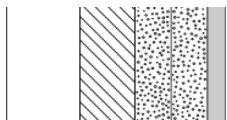
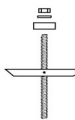

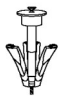
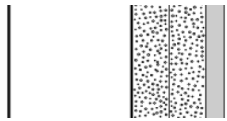
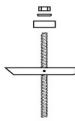

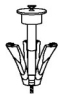
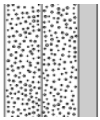


<b>Product</b>	PLUS toiletsteun, 850 mm, rechtshandige bediening
<b>Artikelnummer</b>	R370485035

## Installatie in verschillende wandtypes

	<b>Betonwanden &gt;B25</b> V8610 - Bevestigingsmateriaal, 8 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Gemetselde wanden &gt;= Mz12</b> V8610 - Bevestigingsmateriaal, 8 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Kalksteen&gt;=Hiz12</b> V8610 - Bevestigingsmateriaal, 8 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Gasbeton P4</b> V8660 - Bevestigingsmateriaal, 8 bouten M8 x 35, pluggen FTP M 8. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout</b> V8610 - Bevestigingsmateriaal, 8 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	



<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	PLUS toiletsteun, 850 mm, rechtshandige bediening R370485035
	<b>Gipsplaten, watervast, versterkt met hout</b> Muurbevestigingen (8 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.   
	<b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal</b> Muurbevestigingen (8 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.   
	<b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast</b> Muurbevestigingen (8 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks. 