




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	VALUE IV Duschklappsitz mit Bodenstütze, Festmontage R1622000112
Farbe	VVS: 777525412 NRF: 6314098 RSK: 8565070 EAN: 5708590377728 HMI: 124486 DB: 2510921 FDA: INN/D135865 Anthrazitgrau
Produkt- beschreibung	 Der hochklappbare Duschsitz und die passende Rückenlehne der VALUE IV Serie bieten eine einfache Lösung für Nutzer, die sich beim Duschen hinsetzen möchten. VALUE IV Duschsitz. Festeinbau. Sitz ist hochklappbar. Materialien: Aluminium, Rilsan-beschichtetem Edelstahl und Vakuumgeformtes Polyethylen (PE). Inkl. Befestigungsschrauben für massives Mauerwerk. Dübeln müssen separat bestellt werden.
Verstellung Produktkapazität	Festmontage Maximales Anwendergewicht: 135 kg. Bei einer Belastung der Duschsitz mit 135 kg, wird jede Montageschraube folglich mit bis zu 125 kg. <i>VALUE Duschsitze wurden statisch mit einem Sicherheitsfaktor 1,5 getestet. Dies entspricht den Anforderungen der geltenden Normen.</i>
Materialien Ergonomie	Das Wandscharnier ist aus Aluminium hergestellt und der Rahmen und der Bodenstütze sind aus Rilsan-beschichtetem Edelstahl hergestellt. Rilsan-Beschichtung bietet einen optimalen Schutz gegen Korrosion, eine angenehme Haptik und die Möglichkeit der einfachen Reinigung. Der Sitz ist aus Vakuumgeformtes Polyethylen (PE) hergestellt. Das rutschfeste Profil des Sitzes sorgt dafür, dass Wasser sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Position abfließen kann. Der Sitz ist zur Mitte hin leicht gewölbt, was dem Benutzer hilft, in der Mitte des Sitzes zu bleiben.

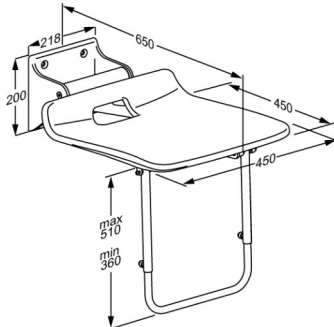

PRESSALIT®

Produkt	VALUE IV Duschklappsitz mit Bodenstütze, Festmontage
Produktnummer	R1622000112
Funktionen	Der hochklappbare Duschsitz ist für die Montage im Duschbereich konzipiert und lässt sich je nach Bedarf leicht hoch- und herunterklappen. Sitz und Rückenlehne lassen sich zur Reinigung leicht abnehmen. Mit extra Beinstützen.
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Zur Desinfektion der Oberflächen können chlorbasierte Desinfektionsmittel verwendet werden. Beachten Sie dabei die Produktspezifikationen und Sicherheitshinweise des Produkts. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes Klorilli (Kiihto Clean) NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.



PRESSALIT®

Produkt	VALUE IV Duschklappsitz mit Bodenstütze, Festmontage
Produktnummer	R1622000112

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

13. juli 2026