




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	VALUE IV bruseklapsæde med støtteben, fastmonteret R1622000112
Farve	VVS: 777525412 NRF: 6314098 RSK: 8565070 EAN: 5708590377728 HMI: 124486 DB: 2510921 FDA: INN/D135865 Antracitgrå
Produktbeskrivelse	 VALUE IV bruseklapsæde og ryglæn er den enkle løsning for brugere der har behov for at kunne sidde ned mens de tager brusebad. VALUE IV brusesæde. Fast højde. Sædet er opklappeligt. Materialer: Trykstøbt aluminium, Rilsan-belagt rustfrit stål og vakuumformet polyethylen (PE). Inkl. monteringsbolte til massiv mur. Plugs afhænger af vægtype, og skal bestilles separat.
Justerbarhed Produktkapacitet	Fastmonteret Maksimal brugervægt: 135 kg. Når sædet belastes med 135 kg, belastes hver monteringskrue med 125 kg. <i>VALUE brusesæder er testet statisk med en sikkerhedsfaktor på 1,5 i henhold til de anvendte hjælpemiddelstandarder.</i>
Materialer Ergonomi Funktioner	Vægbeslaget er fremstillet i trykstøbt aluminium, rammen og støttebenet i Rilsan-belagt, rustfrit stål. Rilsan-belægningen giver god beskyttelse mod rust, er behagelig at røre ved og let at rengøre. Sædet er fremstillet i vakuumformet polyethylen (PE). Sædets skridsikre mønster sikrer, at vandet løber af, uanset om det er i vandret eller lodret position. Sædet er let buet ind mod midten, hvilket hjælper brugeren med at blive siddende midt på sædet. Bruseklapsædet er designet til montering i bruseområdet og kan nemt klappes op og ned efter behov. Sæde og ryg kan let afmonteres ved rengøring.

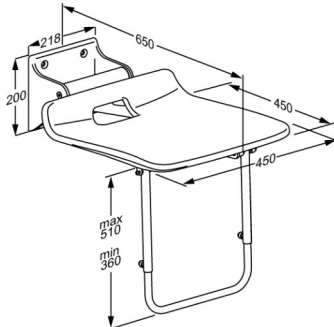

PRESSALIT®

Produkt	VALUE IV bruseklapsæde med støtteben, fastmonteret
Varenummer	R1622000112
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Klorbaserede desinfektionsmidler kan bruges til desinfektion af overflader i henhold til produktspecifikationen og sikkerhedsforanstaltninger for disse produkter. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortynses ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70% WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes Klorilli (Kiilto Clean) IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.



PRESSALIT®

Produkt	VALUE IV bruseklapsæde med støtteben, fastmonteret
Varenummer	R1622000112

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

13. juli 2026