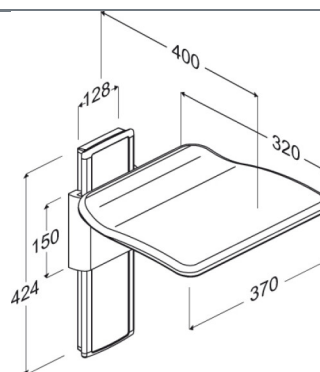




PRESSALIT®

Produkt	PLUS Klappsitz, manuell höhenverstellbar
Produktnummer	R5520112000
Farbe	VVS:777531200 NRF:7501003 RSK:7973927 EAN:5708590306360 HMI: 130158 NBS:N13:448 FDA:INN/D135865 Weiß
Produkt- beschreibung	PLUS Klappsitz. Um 240 mm höhenverstellbar. Anthrazitgraue Abdeckplatte auf Wandschiene. Der Sitz ist hochklappbar. Exkl. Befestigungsmaterial. Klappsitze sind für Verwendung in der Dusche nicht geeignet. Siehe Duschsitze stattdessen. PLUS Klappsitz. Um 240 mm höhenverstellbar. Anthrazitgraue Abdeckplatte auf Wandschiene. Materialien: Aluminium mit einer 10µm Eloxalschicht, Duroplast und Kunststoff. Exkl. Befestigungsmaterial.
Verstellung	Höhenverstellbar
Höhenverstellung	240 mm
Produktkapazität	Maximales Anwendergewicht: 265 kg. Bei einer Belastung der Klappsitz mit 265 kg, wird jede Montageschraube folglich mit bis zu 23 kg belastet. <i>PLUS Klappsitze wurden statisch mit einem Sicherheitsfaktor 1,5 getestet. Dies entspricht den Anforderungen der geltenden Normen.</i>
Materialien	Aluminium mit einer 10µm Eloxalschicht, Duroplast und Kunststoff.





PRESSALIT®

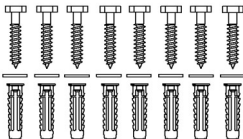
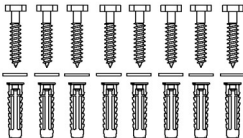
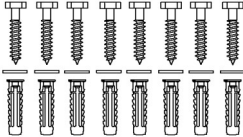
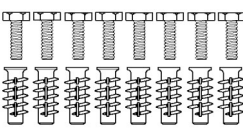
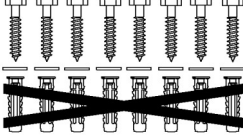
Produkt	PLUS Klappsitz, manuell höhenverstellbar
Produktnummer	R5520112000
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abgetrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können. ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE: Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.



PRESSALIT®

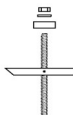
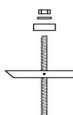
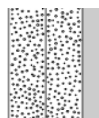
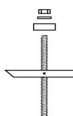
Produkt	PLUS Klappsitz, manuell höhenverstellbar
Produktnummer	R5520112000

Montage in verschiedenen Wandtypen

	Beton >B25 V8610 - Befestigungsmaterial, 8 Stck. Schlüsselschrauben Ø8 x 70, Dübeln SX10. Muss separat bestellt werden.	
	Vollziegel >= Mz12 V8610 - Befestigungsmaterial, 8 Stck. Schlüsselschrauben Ø8 x 70, Dübeln SX10. Muss separat bestellt werden.	
	Kalklochsandstein >= Hlz12 V8610 - Befestigungsmaterial, 8 Stck. Schlüsselschrauben Ø8 x 70, Dübeln SX10. Muss separat bestellt werden.	
	Porenbeton P4 V8660 - Befestigungsmaterial, 8 Stck. Senkkopfbolzen M8 x 35, Dübeln FTP M 8. Muss separat bestellt werden.	
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfüterung V8610 - Befestigungsmaterial, 8 Stck. Schlüsselschrauben Ø8 x 70, Dübeln SX10. Bei Holz-Hinterfüterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel). Muss separat bestellt werden.	



PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	PLUS Klappsitz, manuell höhenverstellbar R5520112000			
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten Befestigungsmaterial (8 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.			
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm Befestigungsmaterial (8 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.			
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung Befestigungsmaterial (8 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.			

pressalit.com

PRESSALIT®