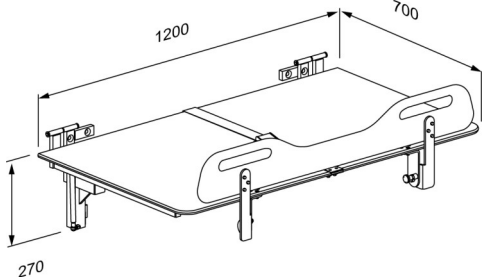




# PRESSALIT®

<b>Produkt</b> <b>Produktnummer</b>	CT 5000 Pflegeliege, Festeinbau R8455512000
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>VVS: 777540820 EAN: 5708590376585 HMI: 138135 FDA: INT/D124320</p>  <p>Pressalit bietet eine große Auswahl hoch qualitativer Dusch- und Pflegeliegen in verschiedenen Ausführung. Wir bieten zum Beispiel sowohl Elektrisch höhenverstellbare Dusch- und Pflegeliegen, Nicht höhenverstellbare Dusch- und Pflegeliegen und Mobile, höhenverstellbare Dusch- und Pflegeliegen. Sie bilden eine sichere Basis für die Pflege und das Umkleiden von Erwachsenen und Kindern in den vielfältigsten Einrichtungen</p> <p>Die Liegen können in können in Schulen, Institutionen, Krankenhäusern und in Privathaushalten verwendet werden. Sie zeichnen sich durch eine robuste Oberfläche aus, die sowohl komfortabel als auch sehr leicht zu reinigen ist. Die höhenverstellbare Funktion und die Flexibilität gewährleisten optimale Arbeitsbedingungen für den Helfer sowie ein hohes Maß an Komfort und Sicherheit für den Benutzer.</p> <p>CT 5000 Pflegeliege, Liegefläche in Kompaktlaminat, 700 x 1200 mm , weiß. Mit Seitengitter und Körpergürtel, hochklappbar, Festeinbau, Wandmontage.</p>
<b>Verstellung</b> <b>Höhenverstellung</b> <b>Produktkapazität</b>	<p>Festmontage</p> <p>0 mm</p> <p>Maximales Benutzergewicht (MUM): 150 kg. Maximale Belastung (SWL): 150 kg. Bei einer Belastung der Pflegeliege mit 150 kg, wird jede Montageschraube folglich mit bis zu 52 kg belastet.</p> <p><i>Die Duschliege ist mit 225 kg statisch getestet gemäß den Anforderungen der Norm ISO 17966, die eine Prüfung mit einem Sicherheitsfaktor von 1,5 erfordert.</i></p>
<b>Materialien</b>	Lackierter Stahl, Liegefläche in Compact Density Fiberboards (CDF).

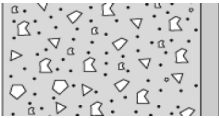
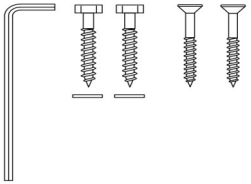

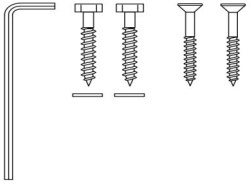
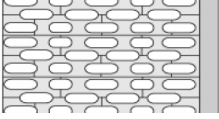
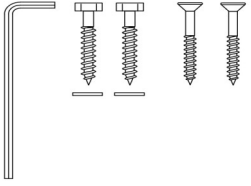
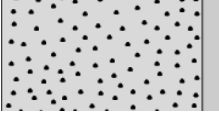
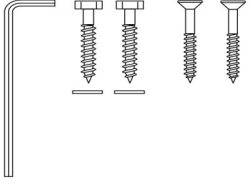
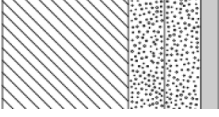
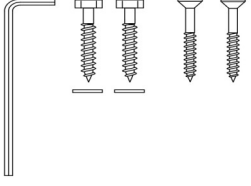


<b>Produkt</b>	CT 5000 Pflegeliege, Festeinbau
<b>Produktnummer</b>	R8455512000
<b>Ergonomie</b>	<p>Die ergonomisch geformten Seitengitter des Pflegeliege haben ein praktisches niedriges Mittelstück, welches dem Pflegepersonal einen besseren Zugang und eine bessere Arbeitsumgebung bietet, während die zu pflegende Person auf den Pflegeliege versetzt, gewechselt und angezogen werden kann.</p> <p>Die leicht zu reinigenden, glatten Kontaktflächen verhindern, dass sich Schmutz ablagert und Bakterien ansammeln.</p>
<b>Garantie</b>	<p>Für alle Pressalit-Hilfsmittel gewähren wir innerhalb von drei Jahren ab Rechnungsdatum Garantie auf Material- und Herstellungsfehler. Im Falle eines nachweisbaren Mangels erfolgt eine kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung nach unserem Ermessen.</p>
<b>Reinigung</b>	<p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p><b>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes OxiGenesis from ENVIROX</p> <p><b>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p>



<b>Produkt</b>	CT 5000 Pfliegeliege, Festeinbau
<b>Produktnummer</b>	R8455512000

## Montage in verschiedenen Wandtypen

	<b>Beton &gt;B25</b> Befestigungsmaterial, 2 Stck Schlüsselschrauben Ø10 x 70 und 2 Stck Senkkopfschrauben Ø10 x 80	
	<b>Vollziegel &gt;= Mz12</b> Befestigungsmaterial, 2 Stck Schlüsselschrauben Ø10 x 70 und 2 Stck Senkkopfschrauben Ø10 x 80	
	<b>Kalklochsandstein &gt;= Hlz12</b> Befestigungsmaterial, 2 Stck Schlüsselschrauben Ø10 x 70 und 2 Stck Senkkopfschrauben Ø10 x 80	
	<b>Porenbeton P4</b> Befestigungsmaterial, 2 Stck Schlüsselschrauben Ø10 x 70 und 2 Stck Senkkopfschrauben Ø10 x 80	
	<b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfüterung</b> Befestigungsmaterial, 2 Stck Schlüsselschrauben Ø10 x 70 und 2 Stck Senkkopfschrauben Ø10 x 80	



<b>Produkt</b> <b>Produktnummer</b>	CT 5000 Pflageliege, Festeinbau R8455512000	
	<b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten</b> Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht.	
	<b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm</b> Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht.	
	<b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung</b> Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht.	

Inkl. Befestigungsschrauben für Wand. Das ist die Verantwortung des Installateurs zu sichern, dass korrekte Dübeln verwendet werden. Bitte Montageanleitung sehen.