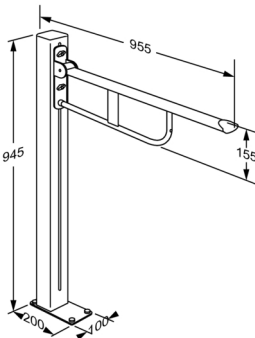




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	VALUE Stützklappgriff mit Bodenstütze R1161000
Farbe	VVS:615722425 NRF:6190517 RSK:8980351 EAN:5708590176697 HMI: 25416 NBS:N13:436 FDA:ILS/D135866 Weiß
Produkt- beschreibung	 <p>VALUE Stützklappgriff, Boden montiert, freistehend Fußbodensäule, Ausladung 955 mm. Um 670 mm höhenverstellbar. Das ergonomische Design sorgt für einen festen und angenehmen Halt sowie ein gutes Gefühl davon, wo die Stütze endet. Inkl. Befestigungsschrauben für massives Boden. Dübeln müssen separat bestellt werden.</p> <p>VALUE Stützklappgriff, Boden montiert, freistehend Fußbodensäule, Ausladung 955 mm. Um 670 mm höhenverstellbar. Das ergonomische Design sorgt für einen festen und angenehmen Halt sowie ein gutes Gefühl davon, wo die Stütze endet. Materialien: Rilsan-beschichteter Stahl, druckgegossenes Aluminium, Kunststoff. Inkl. Befestigungsschrauben für massives Boden. Dübeln müssen separat bestellt werden.</p>
Verstellung Höhenverstellung	Höhenverstellbar 670 mm
Produktkapazität	Max. Belastbarkeit: 120 kg.
Materialien	Hauptmaterial: Stahl Oberfläche: Rilsan Endkappe: Nylon (PA)



Produkt	VALUE Stützklappgriff mit Bodenstütze
Produktnummer	R1161000
Ergonomie	<p>Die Griffe bieten eine gute Hilfe beim Hinsetzen, Sitzen, Aufstehen und Stehen.</p> <p>Gute breite Stützflächen für Hände und Arme sowie die abgerundete Form geben einen sicheren Halt.</p>
Funktionen	<p>Der Stützklappgriff kann hochgeklappt werden, um Platz zu schaffen.</p> <p>Höhenverstellbar.</p>
Garantie	<p>Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.</p>



PRESSALIT®

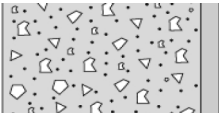
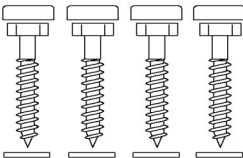

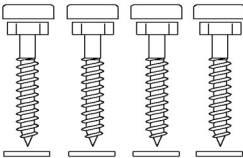
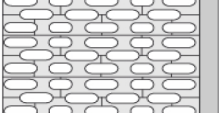
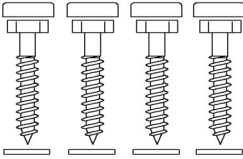
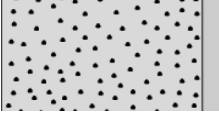
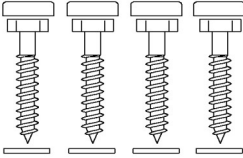
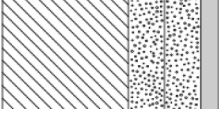
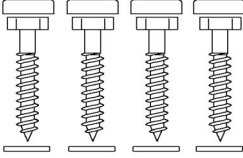
Produkt	VALUE Stützklappgriff mit Bodenstütze
Produktnummer	R1161000
Reinigung	<p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Zur Desinfektion der Oberflächen können chlorbasierte Desinfektionsmittel verwendet werden. Beachten Sie dabei die Produktspezifikationen und Sicherheitshinweise des Produkts.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes Klorilli (Kiilto Clean)</p> <p>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p>



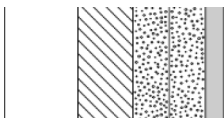
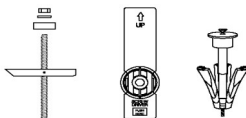
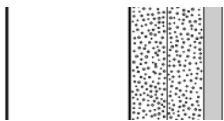
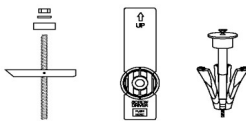
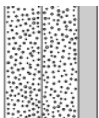
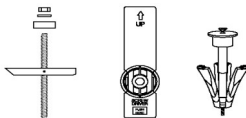
PRESSALIT®

Produkt	VALUE Stützklappgriff mit Bodenstütze
Produktnummer	R1161000

Montage in verschiedenen Wandtypen

	Beton >B25 V8596 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, mit weisse Abdeckung ist beigefügt. Dübeln müssen separat bestellt werden.	
	Vollziegel >= Mz12 V8596 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, mit weisse Abdeckung ist beigefügt. Dübeln müssen separat bestellt werden.	
	Kalklochsandstein >= Hlz12 V8596 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, mit weisse Abdeckung ist beigefügt. Dübeln müssen separat bestellt werden.	
	Porenbeton P4 V8596 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, mit weisse Abdeckung ist beigefügt. Dübeln müssen separat bestellt werden.	
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung V8596 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, mit weisse Abdeckung ist beigefügt. Dübeln müssen separat bestellt werden.	



Produkt Produktnummer	VALUE Stützklappgriff mit Bodenstütze R1161000
	<p>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten</p> <p>Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.</p> 
	<p>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm</p> <p>Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.</p> 
	<p>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung</p> <p>Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.</p> 

Inkl. Befestigungsschrauben für Wand. Das ist die Verantwortung des Installateurs zu sichern, dass korrekte Dübeln verwendet werden. Bitte Montageanleitung sehen.