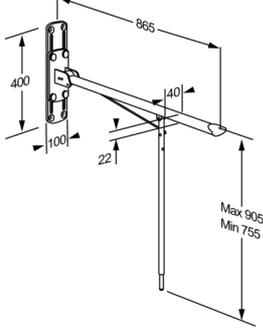




PRESSALIT®

Article Numéro article	VALUE barre de relèvement, réglable en hauteur R1111000
Couleur	VVS:615722410 NRF:6191644 RSK:7972413 EAN:5708590176437 HMI: 25414 NBS:N13:436 FDA:ILS/D135866 Blanc
Description	 <p>Barre de relèvement, relevable, réglable en hauteur de 150 mm, avec pied.< Vis de montage incluses. Chevilles à commander séparément.</p> <p>Barre de relèvement, relevable, réglable en hauteur de 150 mm, avec pied. Vis de montage incluses. Chevilles à commander séparément.</p>
Réglage Hauteur de réglage	Réglable en hauteur 150 mm
Capacité du produit	Charge maximale : 135 kg. Lorsque le barre de relèvement est chargé de 135 kg, chaque vis de montage est chargé de 29 kg.
Matériaux	La matière de base: Acier La matière de surface: Rilsan L'extrémité des barres: Nylon(PA)
Ergonomie	Pour un appui optimal en position assise ou debout, et lorsqu'on se relève ou s'assied. Large surface pour poser le main et le bras, et forme arrondie pour une préhension stable et agréable.

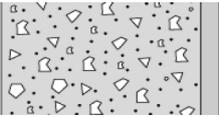
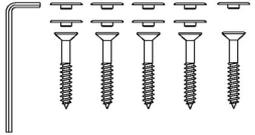
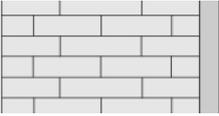
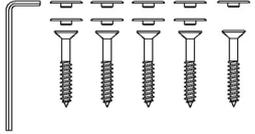
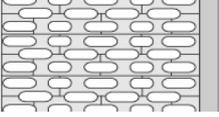
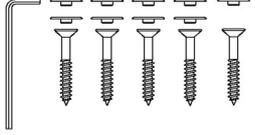
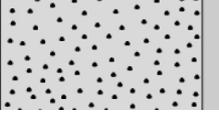
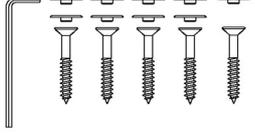
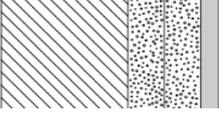
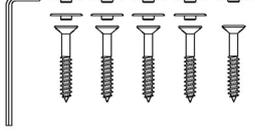


Article	VALUE barre de relèvement, réglable en hauteur
Numéro article	R1111000
Fonctions	<p>Rabattable en cas de non-utilisation ou pour libérer de l'espace</p> <p>Avec pied pour support supplémentaire</p> <p>Réglable en hauteur de 145 mm</p>
Garantie	<p>Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.</p>
Nettoyage	<p>Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs et corrosifs, car cela pourrait endommager la surface.</p> <p>Pour désinfecter la surface, des désinfectants peuvent être utilisés en tenant compte des caractéristiques et des précautions de sécurité liées à ces produits.</p> <p>Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage.</p> <p>NETTOYANTS DÉSINFECTANTS :</p> <ul style="list-style-type: none">Clinimax Difficil-SErisan OXY+Sprit (husholdningsprit)Suma Bac D10VirkonRodalon DesinfektionssprayLysoformin SpezialCaviCideSufanios PremiumTvättspit 70%WipeClean UniversalCleaningChlorine Disinfection WipesKlorilli (Kilto Clean) <p>NETTOYANTS NON-DÉSINFECTANTS :</p> <ul style="list-style-type: none">Suma Star free D1Taski 100Taski 200Milizid Citro <p>Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.</p>
Déclaration de conformité	<p>Ce produit répond aux exigences de la réglementation (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.</p>

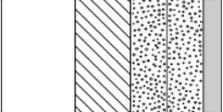
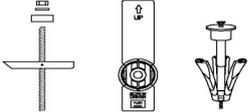
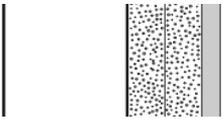
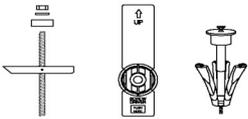
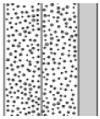


Article	VALUE barre de relèvement, réglable en hauteur
Numéro article	R1111000

Installation dans de différents types de mur

	Béton >B25 V8592 - 5 vis fraisées Ø10 x 80, avec couvercles à vis blancs inclus. Chevilles doivent être commandé séparément.	
	Brique pleine >= Mz12 V8592 - 5 vis fraisées Ø10 x 80, avec couvercles à vis blancs inclus. Chevilles doivent être commandé séparément.	
	Parpaing plein >= Hlz12 V8592 - 5 vis fraisées Ø10 x 80, avec couvercles à vis blancs inclus. Chevilles doivent être commandé séparément.	
	Béton cellulaire P4 V8592 - 5 vis fraisées Ø10 x 80, avec couvercles à vis blancs inclus. Chevilles doivent être commandé séparément.	
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de bois V8592 - 5 vis fraisées Ø10 x 80, avec couvercles à vis blancs inclus. Chevilles doivent être commandé séparément.	



Article Numéro article	VALUE barre de relèvement, réglable en hauteur R1111000
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de contreplaqué 22 mm Vis de montage (5 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées. 
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée d'acier 2 mm Vis de montage (5 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées. 
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable Montage dans ce type de mur n'est pas recommandé - risque de blessure mortelle pour des personnes. 

C'est la responsabilité de l'installateur d'assurer l'usage des fixations murales appropriées.