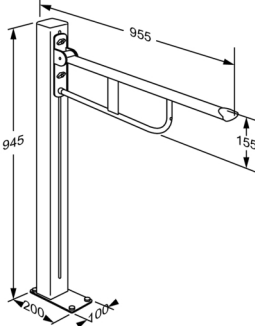




PRESSALIT®

Product Varunummer	VALUE toalettarmstöd på golvpelare R1161000
Färg	VVS:615722425 NRF:6190517 RSK:8980351 EAN:5708590176697 HMI: 25416 NBS:N13:436 Vit
Beskrivning	 VALUE toalettarmstöd, golvmonterad på fritstående golvpelare, total längd 955 mm. Höjd justerbar 670 mm. Den ergonomiska designen ger ett fast och skönt grepp och det är lätt att känna var stöden slutar. Inkl. monteringsskruvar för massiv sten. Pluggs måste beställas separat. VALUE toalettarmstöd, golvmonterad på fritstående golvpelare, total längd 955 mm. Höjd justerbar 670 mm. Den ergonomiska designen ger ett fast och skönt grepp och det är lätt att känna var stöden slutar. Material: Rilsan-belagt stål, tryckformat aluminium, plast. Inkl. monteringsskruvar för massiv sten. Pluggs måste beställas separat.
Justerbar Höjdjustering	Höjdreglerbar 670 mm
Produktkapacitet	Maximal vertikal belastning: 120 kg.
Ergonomi Funktioner	Den ergonomiska designen ger ett fast och skönt grepp och det är lätt att känna var stöden slutar. Stöden kan fällas upp när den inte används. Lämpar sig bra om - väggen inte är stabil, - där väggmontering inte är möjlig, - avståndet mellan vägg och toalett är över 700 mm.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.



PRESSALIT®

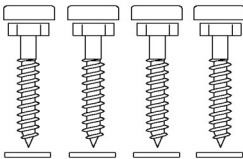
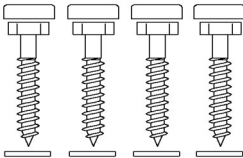
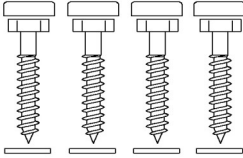
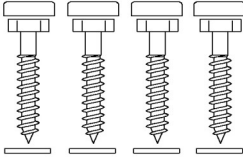
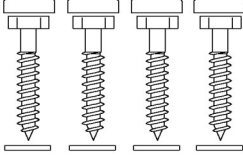
Product	VALUE toalettarmstöd på golvpelare
Varunummer	R1161000
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. För rengöring av ytan kan klorinbaserade desinficeringsmedel användas enligt produktspecifikationen och säkerhetsföreskrifterna för de här produkterna. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättssprit 70% WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes Klorilli (Kiilto Clean) INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.
Överensstämmelses deklaration	Denne produkt är tillverkad i enlighet med förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter.



PRESSALIT®

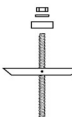
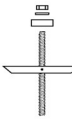
Product	VALUE toalettarmstöd på golvpelar
Varunummer	R1161000

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8596 - 4 st. skruvar Ø10 x 70, med vita täckknappar er inkluderat. Pluggs måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8596 - 4 st. skruvar Ø10 x 70, med vita täckknappar er inkluderat. Pluggs måste beställas separat.	
	Cementsten >= H12 V8596 - 4 st. skruvar Ø10 x 70, med vita täckknappar er inkluderat. Pluggs måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8596 - 4 st. skruvar Ø10 x 70, med vita täckknappar er inkluderat. Pluggs måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8596 - 4 st. skruvar Ø10 x 70, med vita täckknappar er inkluderat. Pluggs måste beställas separat.	



PRESSALIT®

Product Varunummer	VALUE toalettarmstöd på golvpelare R1161000		
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		 
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		 
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		 

Inkl. skruvar till vägg. Det är installatörens ansvar att säkerställa att korrekta pluggs användas. Se monteringsanvisning.

pressalit.com